



CODAN

Système DPT-6000

Précision et diversité des systèmes pour
la mesure invasive de la pression sanguine

The decisive connection



CODAN

Système DPT-6000

Grâce à une technologie de puce ultramoderne,

les pressions effectives sont transformées de manière précise en signaux électriques

Le système de rinçage double fonction intégré

avec débit linéaire permet un remplissage rapide et sans bulles d'air du set de mesure de pression connecté.

La compression des ailettes du système de rinçage permet d'augmenter le flux afin d'obtenir un débit rapide, tandis que l'actionnement de l'ergot de traction permet de contrôler la réponse du capteur de pression. La reproduction exacte sur le moniteur d'une augmentation de pression (onde carrée) indique que le système de transfert (tubulures) a été correctement purgé.

Diversité des systèmes pour la mesure invasive de la pression sanguine

I Les capteurs de pression de la série DPT-6000 réunissent toutes les caractéristiques des systèmes de capteurs de pression modernes et fiables conformément aux exigences émises par les hôpitaux pour la mesure invasive de la pression sanguine.

La facilité de manipulation du système ainsi que son design compact et ergonomique garantissent un emploi fiable.



Câble de capteur exempt de PVC

avec fiche spéciale protégée contre les projections d'eau.

Le connecteur Luer au dos permet

de raccorder le testeur du transducteur et donc de contrôler activement le fonctionnement, sans porter atteinte à la stérilité du système.

Sur le moniteur, le signal de test est inversé

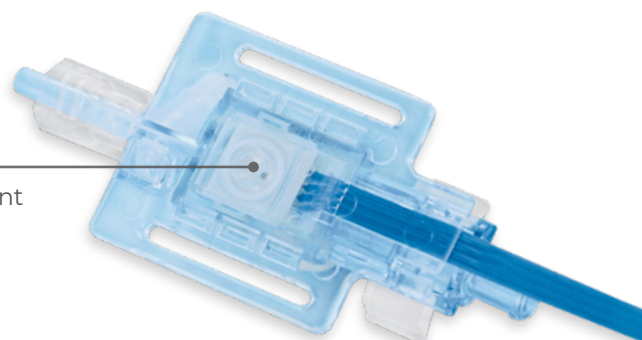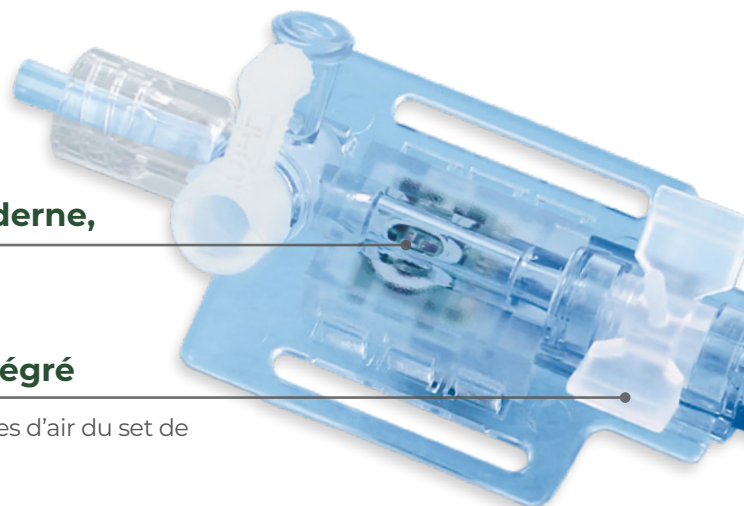

Gamme complète d'accessoires pour le système

Câble d'interface pour raccorder le capteur de pression au moniteur de contrôle

Ces câbles d'interface sont confectionnés sur mesure en fonction de l'équipement de l'hôpital. Ils sont munis côté moniteur de la prise pour moniteur correspondante, et côté patient d'une prise pour raccorder le capteur de pression.



Système modulaire de plaques de support

Cette plaque de support est spécialement conçue pour les capteurs de pression de la série DPT-6000. Les guidages latéraux permettent d'assembler les plaques de support individuelles selon le principe de construction modulaire. En fonction de ses besoins, l'utilisateur peut enficher les unes à côté des autres autant de plaques de support qu'il le souhaite. La plaque de support est en plastique robuste à longue durée de vie, réutilisable et adaptée au lave-vaisselle.

Bande auto-agrippante pour fixer le capteur de pression sur le bras du patient

En fonction de l'indication médicale, il peut s'avérer nécessaire de positionner le capteur de pression le plus près possible de l'accès au site de ponction. Cette bande auto-agrippante est destinée à fixer le capteur de pression directement sur le bras du patient, ce qui permet d'utiliser de très courtes lignes pour mesurer la pression.



CODAN Worldwide

CODAN a une renommée internationale de fabricant et fournisseur de matériel de perfusion/transfusion. Le groupe CODAN emploie plus de 1500 personnes à travers le monde.

CODAN, c'est le synonyme de fiabilité, de qualité et de précision, le tout assuré par le savoir-faire et l'expérience de plus de 60 années de recherche et de développement. Nos propres usines de production et nos filiales de ventes garantissent à nos clients une production et des prestations de services de première qualité.

La gamme des produits CODAN

- Perfuseurs
- Transfuseurs
- Prolongateurs, connecteurs et rampes
- Accessoires de perfusion
- Filtres à perfusion
- Dispositifs pour la néonatalogie/pédiatrie
- Sets de transfert et de prélèvement
- CODAN CYTO®
- Gamme de protection Chemoprotect®
- Seringues
- Sets pour la mesure des pressions par voie invasive
- Pompes à perfusion
- CODAN Software
- Sets spécifiques

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN II, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · United Kingdom
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika

Notre entreprise satisfait aux réglementations prévues par la directive européenne 93/42/CEE et/ou par le Règlement (UE) 2017/745 et entretient des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO 13485:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
23738 Lensahn, Germany

CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany

CODAN US Corporation
Santa Ana, CA 92704, USA

CODAN ARGUS AG
6340 Baar, Switzerland

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS
4970 Rødby, Denmark



Manufacturer

CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18
D-85661 Forstinning
Tel.: +49 (0) 81 21 · 98 02 0
codan@codanpvbccc.de
www.codancompanies.com

The decisive connection