



CODAN

SWAN-LOCK®

Sistema di accesso needle-free

The decisive connection



CODAN

SWAN-LOCK®

Lavorare in modo più sicuro

Essendo sensibile alle preoccupazioni generate dalle ferite accidentali provocate da aghi, CODAN è lieta di offrire il sistema senza ago SWAN-LOCK®. Questo è un altro prodotto CODAN che offre maggiore sicurezza sia per i pazienti sia per il personale medico.

SWAN-LOCK® consente la somministrazione ed il prelievo di liquidi, in modo semplice e sicuro, riducendo notevolmente il rischio di infezioni sia per i pazienti e sia per il personale, svolgendo un importante effetto barriera contro le infezioni. Prima di essere usato, la superficie esterna dello SWAN-LOCK® deve essere disinfettata seguendo il protocollo in uso. La barriera microbica è stata testata per 140 attivazioni e per un arco temporale di 7 giorni. Non è necessario applicare un tappo di protezione. Se usato a lungo termine SWAN-LOCK® dovrebbe essere sostituito secondo le indicazioni del protocollo ospedaliero in uso.

Connessione universale

SWAN-LOCK® è compatibile con le siringhe

SWabable Adapter Needle-free

Luer-Lock e Luer Slip, con prolunghe e altri sistemi di trasferimento. Sebbene SWAN-LOCK® sia raccordabile con le connessioni Luer Slip, si consiglia di utilizzare i raccordi Luer-Lock per una maggiore sicurezza, soprattutto nei casi in cui il paziente non è tenuto sotto costante osservazione del personale di assistenza. Da sottolineare che gli aghi non devono essere utilizzati con SWAN-LOCK®.

Gamma SWAN-LOCK®

In combinazione con altri dispositivi CODAN, come prolunghe a lume singolo, doppio e triplo, Drip SWAN® o altri componenti CODAN come rubinetti a 3 vie o derivazioni ad Y, utilizziamo un SWAN-LOCK® ridotto.

Tutti i componenti SWAN-LOCK® sono privi di metallo. Il design consente molteplici attivazioni, rendendolo un'alternativa economica per tutti i reparti ospedalieri. CODAN sviluppa costantemente nuovi prodotti, in collaborazione con i clinici, per soddisfare le mutevoli esigenze del mercato sanitario.




Meccanismo a valvola


Il meccanismo a valvola di SWAN-LOCK® si apre automaticamente quando viene collegata una siringa. Rimuovendo la siringa, la connessione si chiude automaticamente. Ciò si traduce in un sistema chiuso, che impedisce perdite di sangue, liquidi o l'ingresso di aria. Il connettore maschio sull'adattatore garantisce un collegamento sicuro a cateteri, rubinetti a 3 vie o altri adattatori Luer-Lock femmina.

Volume di riempimento minimo

La versione ridotta di SWAN-LOCK® ha un volume di riempimento di soli 0,07 ml.

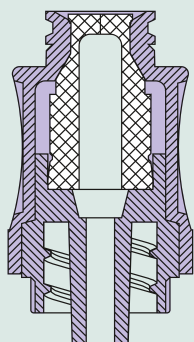

SWAN-LOCK®
chiuso

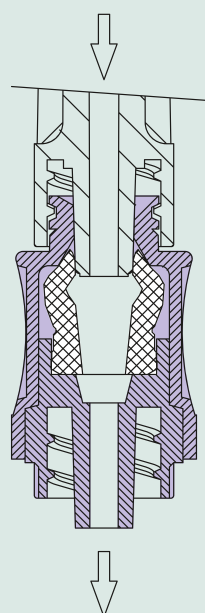

SWAN-LOCK®
si apre automaticamente
quando è connesso

Velocità di flusso

Lo specifico design di SWAN-LOCK® consente una bassa riduzione del flusso (16 %), consentendo in tal modo una velocità di flusso migliore rispetto ai sistemi analoghi presenti sul mercato.

Materiale

SWAN-LOCK® è realizzato senza lattice e PVC ed è compatibile con alcol, lipidi e sangue. La struttura trasparente e il design compatto lo rendono facile da usare consentendo una costante ispezione visiva.

SWAN-LOCK® per la gestione delle infusioni

SWAN-LOCK® è universalmente applicabile e ha un volume di riempimento di soli 0,09 ml, consentendo un dosaggio preciso. Ciò rende SWAN-LOCK® estremamente utile per qualsiasi sistema di somministrazione per infusione.

SWAN-LOCK® con la struttura di colore rosso trasparente, facilita l'individuazione, per esempio in caso di accesso arterioso.



SWAN-LOCK® /
SWAN-LOCK® RED

CODAN Worldwide

CODAN è conosciuta a livello internazionale come fabbricante e fornitore di sistemi per la somministrazione di farmaci. Il gruppo CODAN impiega in tutto il mondo più di 1500 persone.

Il marchio CODAN è sinonimo di affidabilità, qualità e precisione, costruite sull'esperienza e il know-how acquisite in più di 60 anni di ricerca e sviluppo. Gli stabilimenti manifatturieri di proprietà e le unità commerciali dislocate nel mondo sono una garanzia di efficienza produttiva, di una rete di vendita consolidata e un servizio di prima qualità per i nostri clienti nel settore della tutela della salute.

Gamma di prodotti CODAN

- Set di infusione
- Set di trasfusione
- Linee di prolunga e connettori multipli
- Accessori per infusione e trasfusione
- Filtri per infusione e sistemi filtranti
- Prodotti per neonatologia e pediatria
- Sistemi di prelievo, preparazione e somministrazione
- CODAN CYTO®
- Prodotti Chemoprotect®
- Prodotti per urologia e ginecologia
- Siringhe monouso
- Monitoraggio invasivo della pressione sanguigna
- Soluzioni tecnologiche per l'infusione
- Pompe volumetriche e a siringa
- Software
- CODAN COMPONENTS

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN II, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · USA
CODAN Inc. · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · United Kingdom
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
arcomed AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika
arcomed Pty Ltd · Australia
arcomed Ltd · New Zealand

La conformità dei sistemi di gestione della qualità definiti con le disposizioni della norma EN ISO 13485, della Direttiva CEE 93/42 e/o del Regolamento (UE) 2017/745 è stata certificata dagli organismi notificati pertinenti e competenti:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
23738 Lensahn, Germany

CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany

CODAN US Corporation
Santa Ana, CA 92704, USA

CODAN ARGUS AG
6340 Baar, Switzerland

arcomed AG
8302 Kloten, Switzerland

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS
4970 Rødby, Denmark



Manufacturer

CODAN Medizinische Geräte GmbH
Stig Husted-Andersen Straße 11
23738 Lensahn · DE

Tel.: +49 (0) 43 63 · 51 11 · Fax: +49 (0) 43 63 · 51 12 14

codan@codan.de

www.codancompanies.com

The decisive connection