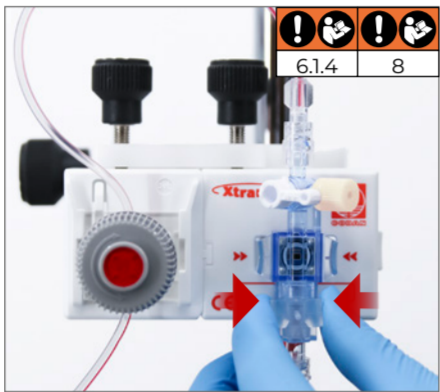
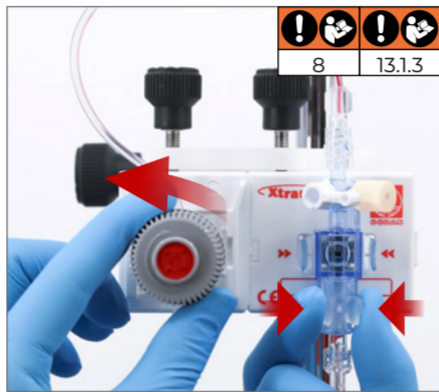




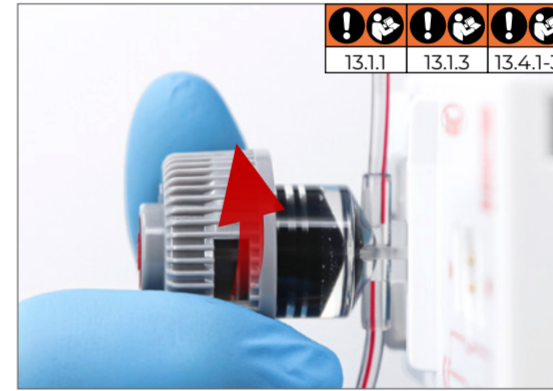







I. Preparazione / riempimento NBSS


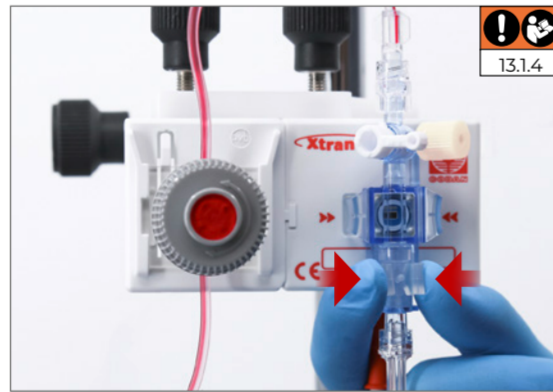


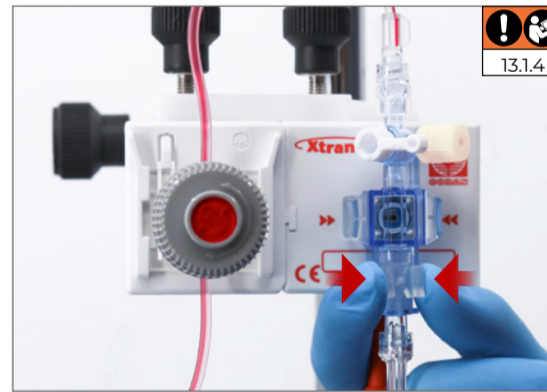


Set	Serbatoio	SWAN Switch
		
		
1 Riempire il set di misurazione della pressione.	2 Durante il riempimento, aprire lentamente il serbatoio a 3/4 di giro (270°) in senso antiorario e richiuderlo nuovamente in senso orario.	3 Riempire completamente e senza formare bolle d'aria lo SWAN Switch.
		4 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.

II. Prelievo di sangue NBSS

* Il est recommandé d'utiliser pour cela des systèmes Luer-Lock verrouillables. Si l'on emploie des systèmes Luer-Slip, veiller à les brancher avec beaucoup de précaution sur la sortie latérale en effectuant une rotation de 90°.

			
1 Disinfectare il punto di prelievo. Rispettare il tempo di esposizione!	2 Mettere SWAN Switch nella posizione di lavaggio.	3 Aprire lentamente il serbatoio ruotando completamente in senso antiorario.	4 Collegare saldamente il contenitore di raccolta.*
			
5 Mettere SWAN Switch nella posizione di prelievo.*	6 Prelevare il campione di sangue.*	7 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.*	8 Scollegare il contenitore di raccolta.*

III. Reinfusione e lavaggio

				
1 Richiudere lentamente il serbatoio ruotando completamente in senso orario.	2 Lavare il sistema NBSS.	3 Disinfectare il punto di prelievo.	4 Mettere SWAN Switch nella posizione di lavaggio.	5 Lavare il sistema NBSS.
				
6 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.	7 Controllo: Verificare la misurazione della pressione e le indicazioni sul monitor.			



Questa Quick Guide serve a informare gli utilizzatori sui passaggi importanti, ma non sostituisce l'osservanza delle istruzioni per l'uso. È indispensabile osservare e seguire le informazioni relative all'uso previsto, nonché le avvertenze e le istruzioni di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso. Le istruzioni sui passaggi fanno riferimento al capitolo corrispondente e alle rispettive avvertenze nelle istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle indicazioni può comportare notevoli rischi per la sicurezza del paziente, dell'utilizzatore e di terzi. Osservare le linee guida igieniche della struttura sanitaria.