
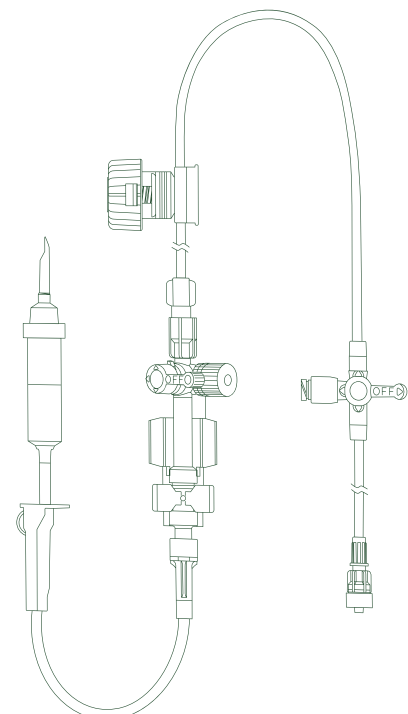
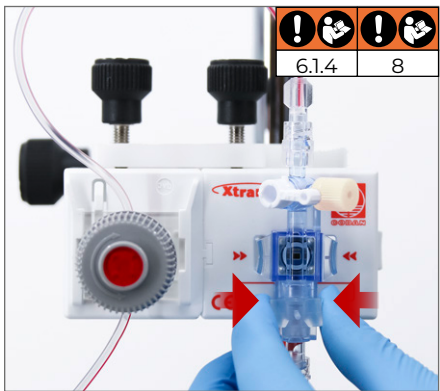


I. Förberedelse / påfyllning NBSS

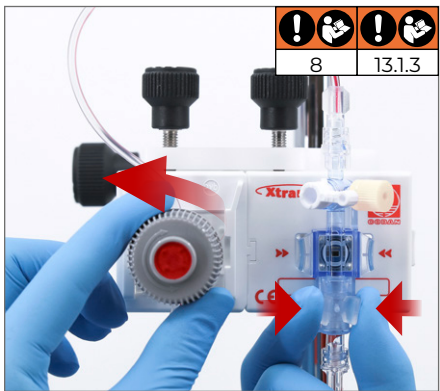


Set	Reservoar	SWAN Switch
 1 Fyll på tryckmätningssätet.	 2 Under påfyllning skruvar du långsamt upp reservoaren 3/4 varv (270°) och skruvar tillbaka.	 3 Fyll SWAN Switch helt så den är fri från luftbubblor.
		 4 Vrid SWAN Switch till läget för tryckmätning.

II. Blodprovstagning NBSS


För användningen rekommenderas låsbara **luer-locksystem**. Säkerställ vid användning av **luer-slipsystem** att dessa ansluts mycket försiktigt och **vridna 90°** vid sidoöppningen.



1 Vrid SWAN Switch till läget för spolning.

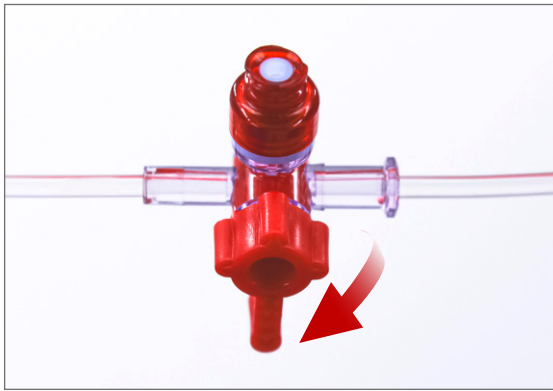

2 Skruva långsamt upp reservoaren helt genom att vrida åt vänster.

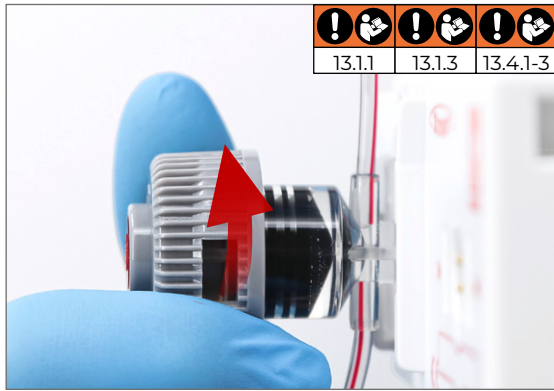

3 Anslut provtagningsbehållaren ordentligt.



4 Vrid SWAN Switch till läget för provtagning.



5 Dra upp blodprovet.



6 Vrid SWAN Switch till läget för tryckmätning.







7 Koppla från provtagningsbehållaren.



8 Desinficera provtagningsporten. Beakta verkningstiden!

III. Återinfusion och spolning

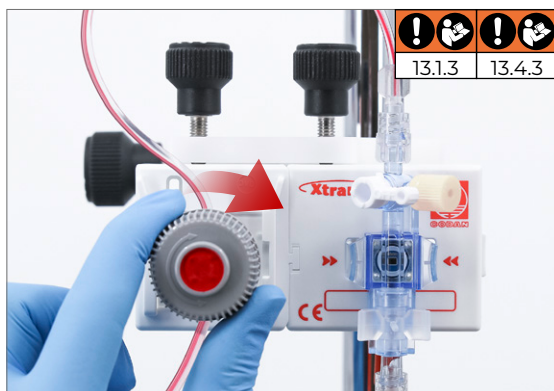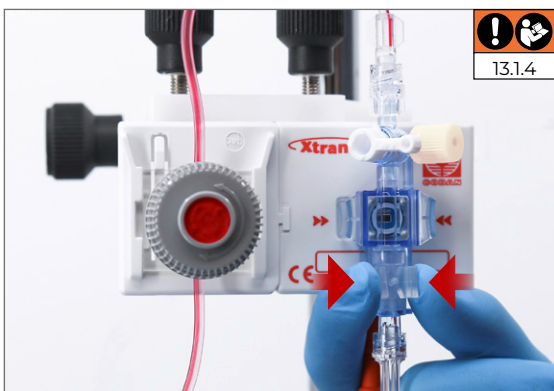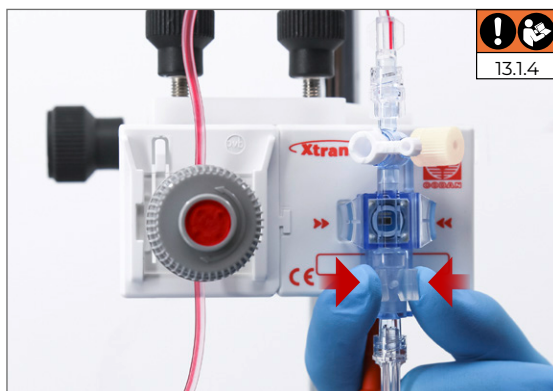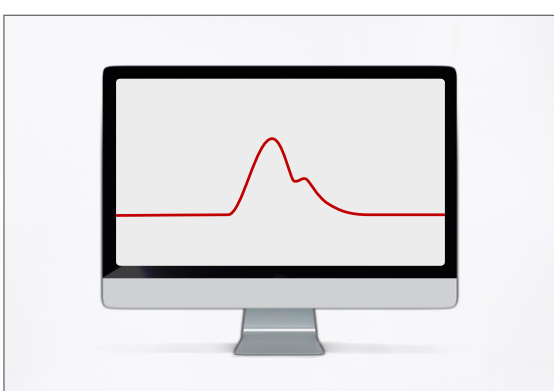 1 Skruva tillbaka reservoaren långsamt genom att vrida åt höger.	 2 Spola NBSS.	 3 Desinficera provtagningsporten.	 4 Vrid SWAN Switch till läget för spolning.	 5 Spola NBSS.
 6 Vrid SWAN Switch till läget för tryckmätning.	 7 Kontroll: Kontrollera tryckmätning och indikering på monitor.			



Denna Quick Guide innehåller information om de viktigaste stegen och ersätter inte bruksanvisningen. Följ alltid all information om avsedd användning samt varnings- och säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen. Instruktionerna gäller tillhörande kapitel och respektive varningar i bruksanvisningen. Vid underlåtenhet att göra detta föreligger betydande säkerhetsrisker för patient, användare och tredje part. Beakta hygienriktlinjerna på din klinik.

