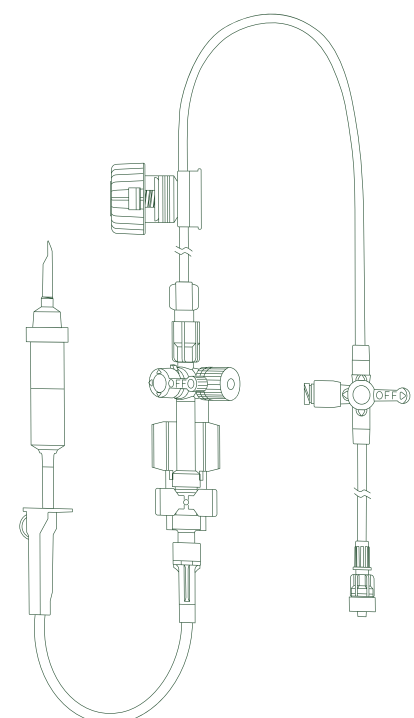
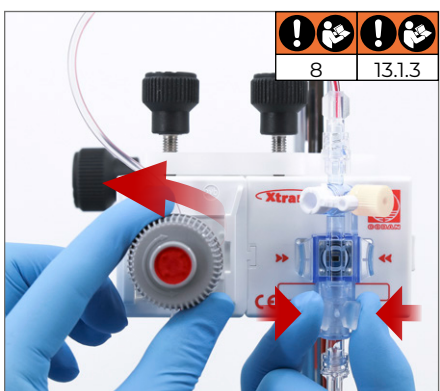


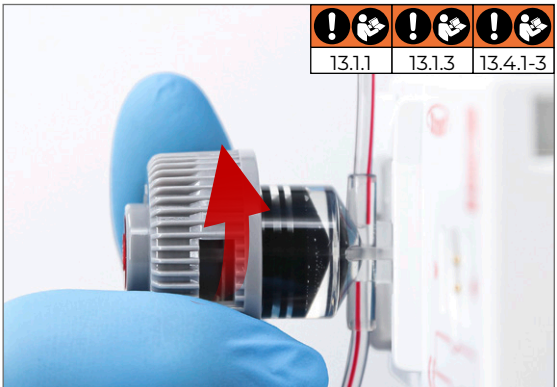


I. Priprava / polnjenje NBSS

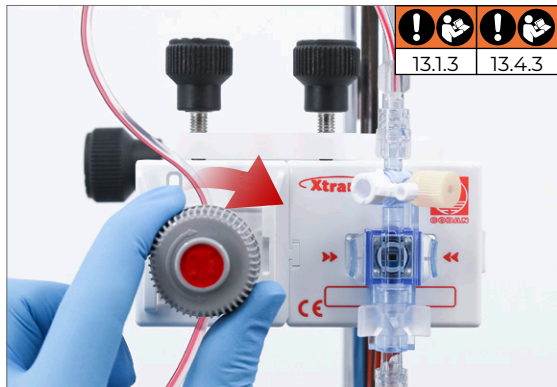
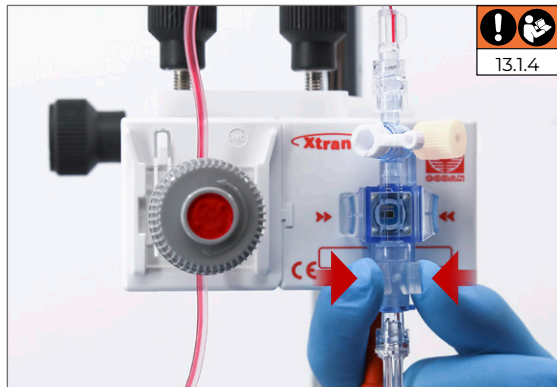
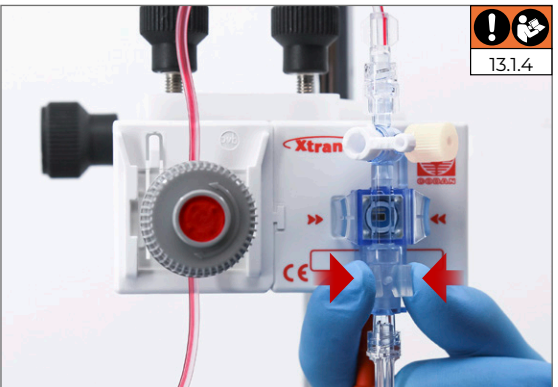
Set	Rezervoar	SWAN Switch
 1 Napolnite komplet za merjenje tlaka.	 2 Med polnjenjem počasi odvijte rezervoar za 3/4 obrata (270°) in ga ponovno obrnite nazaj.	 3 Napolnite SWAN Switch do konca in odstranite vse zračne mehurčke.
		 4 SWAN Switch namestite v položaj za merjenje tlaka.

II. Odvzem krvi NBSS

Za uporabo so priporočljivi sistemi **Luer-Lock**, ki jih je mogoče zakleniti. Pri uporabi sistemov **nastavkov Luer-Slip** je treba paziti, da se le-ti zelo previdno in z **obračanjem za 90°** priključijo na stranski izhod.

 1 SWAN Switch namestite v položaj za spiranje.	 2 Rezervoar počasi popolnoma odprite tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.	 3 Posodo za odvzem trdno priključite.	 4 SWAN Switch namestite v položaj za odvzem.
 5 Odvzemite vzorec krvi.	 6 SWAN Switch namestite v položaj za merjenje tlaka.	 7 Posodo za odvzem odklopite.	 8 Razkužite mesto odvzema. Upoštevajte čas delovanja!

III. Reinfuzija in spiranje

 1 Počasi obrnite rezervoar popolnoma nazaj v smeri urinega kazalca.	 2 Sperite NBSS.	 3 Razkužite mesto odvzema.	 4 SWAN Switch namestite v položaj za spiranje.	 5 Sperite NBSS.
 6 SWAN Switch namestite v položaj za merjenje tlaka.	 7 Kontrola: Preverite merjenje tlaka in prikaz na monitorju.			



Ta Quick Guide vas obvešča o najpomembnejših korakih in ne nadomešča upoštevanja navodil za uporabo. Obvezno upoštevajte informacije o predvideni uporabi ter opozorila in varnostne napotke v navodilih za uporabo. Napotki v korakih se nanašajo na pripadajoče poglavje in ustrezna opozorila v navodilih za uporabo. V primeru neupoštevanja/neskladnosti obstajajo znatna varnostna tveganja za pacienta, uporabnika in tretje osebe. Upoštevajte higienske smernice vaše ustanove.

