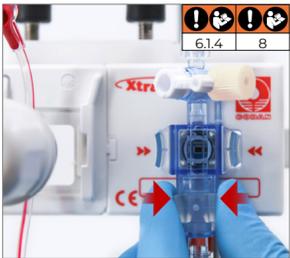
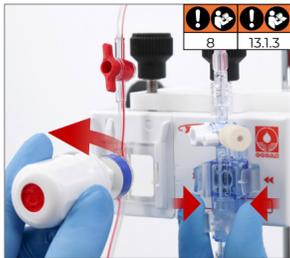
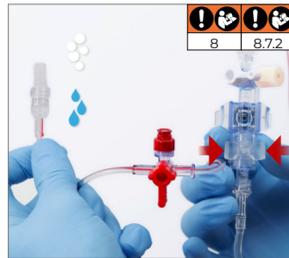
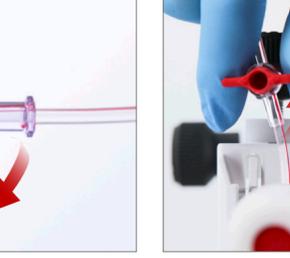
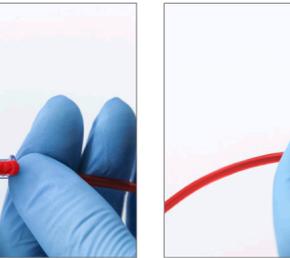


## I. Preparazione / riempimento NBSS<sup>XL</sup>





Set	Serbatoio	SWAN Switch
		
		
1 Riempire il set di misurazione della pressione.	2 Durante il riempimento, aprire lentamente il serbatoio a 3/4 di giro (270°) in senso antiorario e richiederlo nuovamente in senso orario.	3 Riempire completamente e senza formare bolle d'aria lo SWAN Switch.
		4 Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.

## II. Prelievo di sangue NBSS<sup>XL</sup>

Per l'impiego sono consigliati sistemi **Luer-Lock bloccanti**. In caso di utilizzo di sistemi **Luer-Slip**, è necessario assicurarsi che questi siano collegati con molta attenzione e con una **rotazione di 90°** sull'uscita laterale.

-  Mettere SWAN Switch nella posizione di lavaggio.
-  Chiudere il rubinetto a 1 via.
-  Aprire lentamente il serbatoio ruotando completamente in senso antiorario.
-  Collegare saldamente il contenitore di raccolta.
-  Mettere SWAN Switch nella posizione di prelievo.
-  Prelevare il campione di sangue.
-  Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.
-  Scollegare il contenitore di raccolta.
-  Disinfettare il punto di prelievo. Rispettare il tempo di esposizione!

## III. Reinfusione e lavaggio

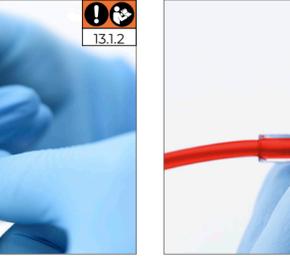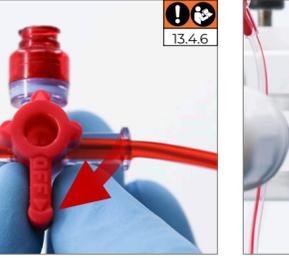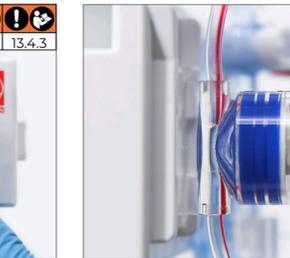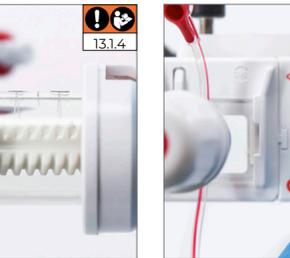-  Richiudere lentamente il serbatoio ruotando completamente in senso orario.
-  Aprire il rubinetto a 1 via.
-  Disinfettare il punto di prelievo.
-  Mettere SWAN Switch nella posizione di lavaggio.
-  Lavare il sistema NBSS<sup>XL</sup>.
-  Mettere SWAN Switch nella posizione di misurazione della pressione.
-  Aprire lentamente il serbatoio a 3/4 di giro (270°) in senso antiorario e richiederlo nuovamente in senso orario.
-  Controllo visivo: Lavare fino a rimuovere tutti i residui di sangue.
-  Lavare il sistema NBSS<sup>XL</sup>.
-  Controllo: Verificare la misurazione della pressione e le indicazioni sul monitor.

Questa Quick Guide serve a informare gli utilizzatori sui passaggi importanti, ma non sostituisce l'osservanza delle istruzioni per l'uso. È indispensabile osservare e seguire le informazioni relative all'uso previsto, nonché le avvertenze e le istruzioni di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso. Le istruzioni sui passaggi fanno riferimento al capitolo corrispondente e alle rispettive avvertenze nelle istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle indicazioni può comportare notevoli rischi per la sicurezza del paziente, dell'utilizzatore e di terzi. Osservare le linee guida igieniche della struttura sanitaria.