
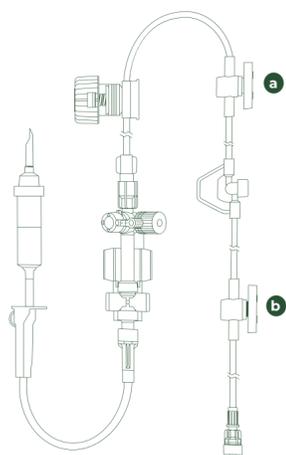
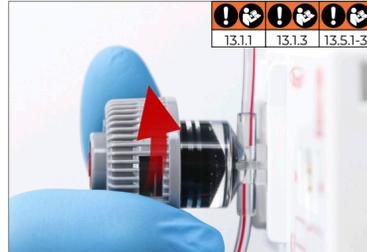
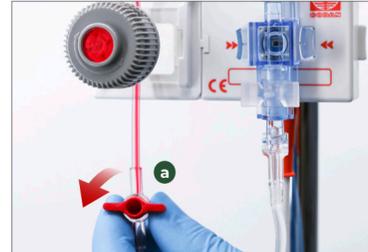


I. Vorbereitung / Befüllung ABSS


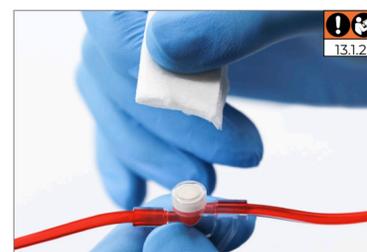


Set	Reservoir	Entnahmeport
 <p>1 Druckmess-Set befüllen.</p>	 <p>2 Während des Befüllens das Reservoir langsam um eine 3/4 Umdrehung (270°) aufdrehen und wieder zurückdrehen.</p>	 <p>3 Entnahmeport vollständig und blasenfrei befüllen.</p>

II. Blutentnahme ABSS

 <p>1 Entnahmestelle desinfizieren. Einwirkzeit beachten!</p>	 <p>2 Reservoir langsam durch Linksdrehung vollständig aufdrehen.</p>	 <p>3 1-Wege-Hahn schließen.</p>	 <p>4 Entnahmebehälter mit dem Entnahmeadapter konnektieren.</p>	 <p>5 Entnahmeadapter inkl. Entnahmebehälter punktieren.</p>
 <p>6 Aufziehen der Blutprobe.</p>	 <p>7 1-Wege-Hahn schließen.</p>	 <p>8 Entnahmeadapter mit dem Entnahmebehälter abziehen.</p>	 <p>9 Entnahmestelle desinfizieren.</p>	

III. Reinfusion & Spülen

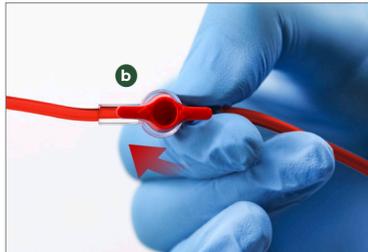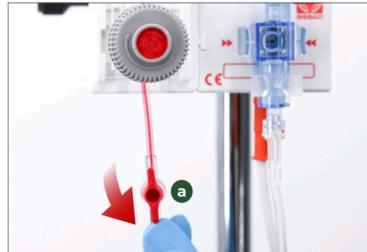 <p>1 1-Wege-Hahn öffnen.</p>	 <p>2 1-Wege-Hahn öffnen.</p>	 <p>3 Reservoir langsam durch Rechtsdrehung vollständig zurückdrehen.</p>	 <p>4 ABSS spülen.</p>	 <p>5 Kontrolle: Druckmessung & Anzeige am Monitor prüfen.</p>
---	--	---	---	---



Dieser Quick Guide informiert Sie über die wichtigsten Handlungsschritte und ersetzt nicht das Beachten der Gebrauchsanweisung. Beachten und befolgen Sie unbedingt die Informationen über den bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie die Warn- und Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung. Die Hinweise in den Handlungsschritten beziehen sich auf das zugehörige Kapitel und die jeweiligen Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung. Bei Nichtbeachten/-befolgen bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken für den Patienten, Anwender und Dritte. Beachten Sie die Hygienerichtlinien Ihrer Einrichtung.