


I. Préparation / Remplissage ABSS



Set

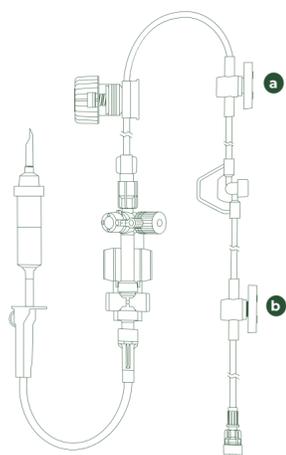

1 Remplir le set de mesure de pression.

Réservoir



2 Remplir le réservoir en l'ouvrant lentement de 3/4 de tour (270°), puis le refermer.



Raccord de prélèvement




3 Purger le raccord de prélèvement et éliminer toutes les bulles d'air.

II. Prélèvement sanguin avec un ABSS



1 Désinfecter le site de prélèvement. Respecter la durée d'action !

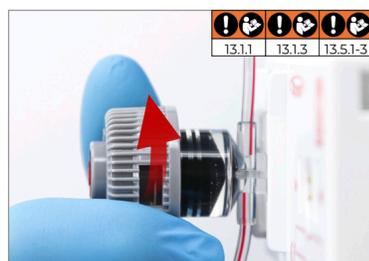

2 Ouvrir entièrement le réservoir en le tournant lentement vers la gauche.



3 Fermer le robinet à 1 voie.



4 Connecter le réservoir de prélèvement sur l'adaptateur de prélèvement.



5 Perforer l'adaptateur de prélèvement avec le réservoir de prélèvement.




6 Aspirer l'échantillon de sang.



7 Fermer le robinet à 1 voie.




8 Retirer l'adaptateur de prélèvement avec le réservoir de prélèvement.

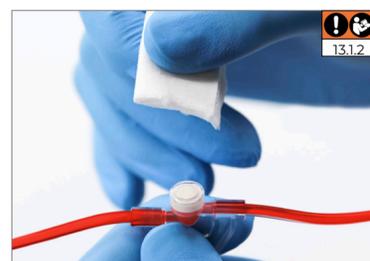


9 Désinfecter le site de prélèvement.

III. Réinjection & rinçage

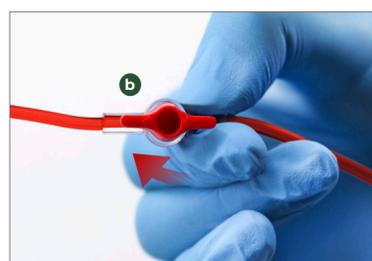


1 Ouvrir le robinet à 1 voie.

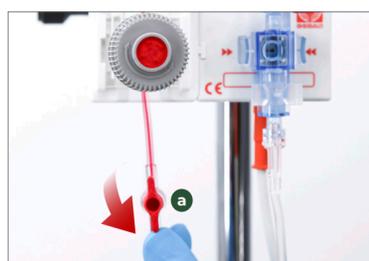

2 Ouvrir le robinet à 1 voie.



3 Refermer entièrement le réservoir en le tournant lentement vers la droite.

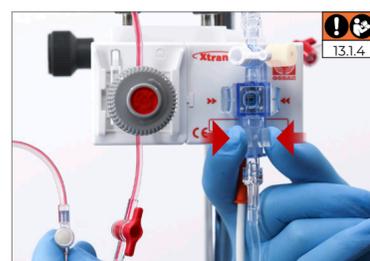

4 Rincer l'ABSS.



5 Contrôle : Vérifier la mesure de la pression et l'affichage sur le moniteur.



Le présent Quick Guide vous informe sur les principaux gestes à effectuer, mais ne remplace pas l'étude de la notice d'utilisation. Il convient d'observer et de suivre impérativement les informations relatives à l'utilisation conforme à la destination prévue ainsi que les mises en garde et les consignes de sécurité stipulées dans la notice d'utilisation. Les remarques concernant les différents gestes se rapportent au chapitre correspondant et aux mises en garde respectives de la notice d'utilisation. Le non-respect ou la non-observation de ces consignes comporte des risques considérables pour la sécurité du patient, de l'utilisateur et de tierces personnes. Respecter les directives de l'établissement en matière d'hygiène.