


I. Preparazione / riempimento ABSS



Set

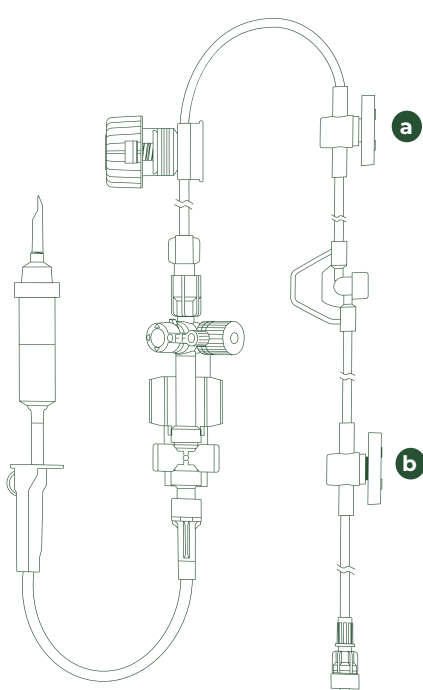

1 Riempire il set di misurazione della pressione.

Serbatoio



2 Durante il riempimento, aprire lentamente il serbatoio a 3/4 di giro (270°) in senso antiorario e richiuderlo nuovamente in senso orario.



Punto di prelievo




3 Riempire completamente e senza formare bolle d'aria il punto di prelievo.

II. Prelievo di sangue ABSS



1 Disinfettare il punto di prelievo. Rispettare il tempo di esposizione!

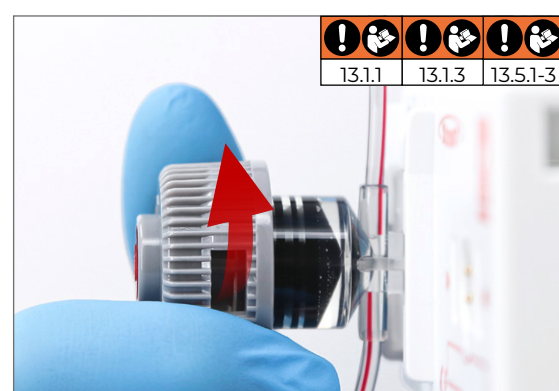

2 Aprire lentamente il serbatoio ruotando completamente in senso antiorario.



3 Chiudere il rubinetto a 1 via.



4 Collegare il contenitore di raccolta all'adattatore per il prelievo.



5 Forare l'adattatore per il prelievo incl. il contenitore di raccolta.



6 Prelevare il campione di sangue.



7 Chiudere il rubinetto a 1 via.




8 Estrarre l'adattatore per il prelievo con il contenitore di raccolta.




9 Disinfettare il punto di prelievo.

III. Reinfusione e lavaggio

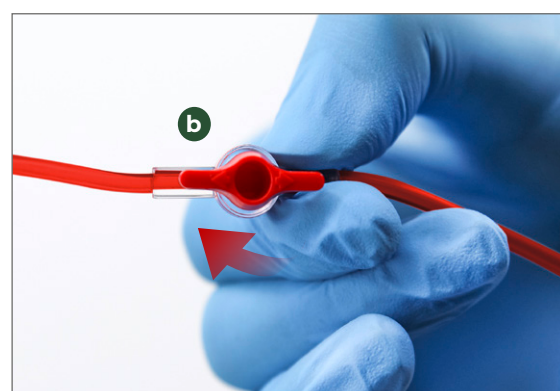


1 Aprire il rubinetto a 1 via.

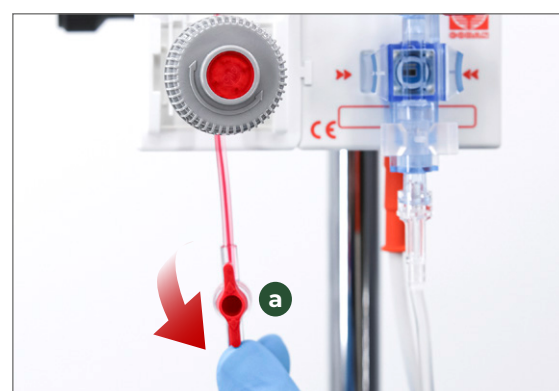

2 Aprire il rubinetto a 1 via.



3 Richiudere lentamente il serbatoio ruotando completamente in senso orario.

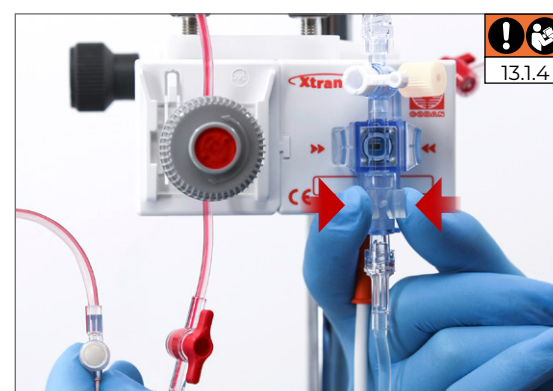

4 Lavare il sistema ABSS.



5 Controllo: Verificare la misurazione della pressione e le indicazioni sul monitor.



Questa Quick Guide serve a informare gli utilizzatori sui passaggi importanti, ma non sostituisce l'osservanza delle istruzioni per l'uso. È indispensabile osservare e seguire le informazioni relative all'uso previsto, nonché le avvertenze e le istruzioni di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso. Le istruzioni sui passaggi fanno riferimento al capitolo corrispondente e alle rispettive avvertenze nelle istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle indicazioni può comportare notevoli rischi per la sicurezza del paziente, dell'utilizzatore e di terzi. Osservare le linee guida igieniche della struttura sanitaria.

