


I. Příprava / plnění systému ABSS



Sada

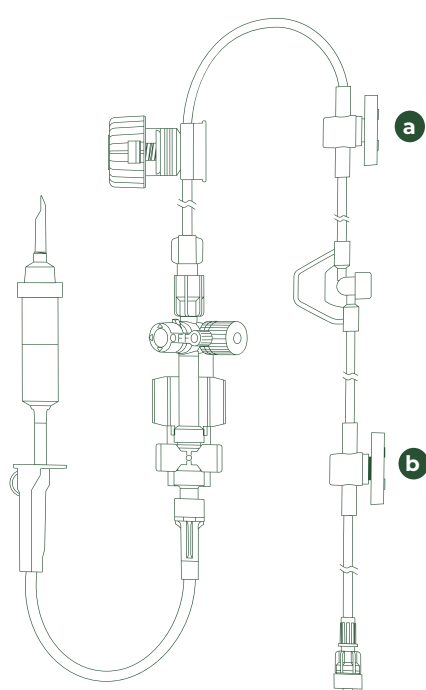

1 Naplňte soupravu k měření tlaku.

Rezervoár



2 Během plnění rezervoár pomalu otevřete otočením o 3/4 otáčky (270°) a znovu otočte zpět.



Odběrový port




3 Naplňte odběrový port zcela a bez vzduchových bublin.

II. Odběr krve ABSS



1 Dezinfikujte místo odběru. Věnujte pozornost době působení!

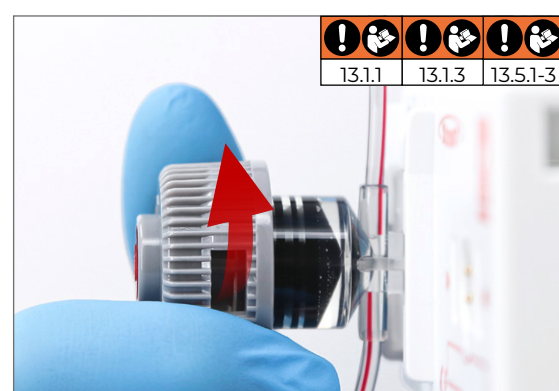

2 Rezervoár pomalu zcela otevřete otáčením proti směru hodinových ručiček.



3 Zavřete 1cestný kohout.



4 Spojte odběrovou nádobku s odběrovým adaptérem.



5 Proveďte punkci odběrného adaptéru vč. odběrovou nádobkou.



6 Proveďte odběr krve.



7 Zavřete 1cestný kohout.




8 Odběrový adaptér spojte s odběrovou nádobkou.




9 Dezinfikujte místo odběru.

III. Reinfuze a vyplachování

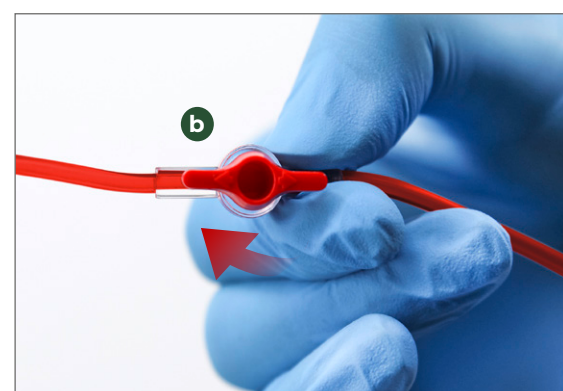


1 Otevřete 1cestný kohout.

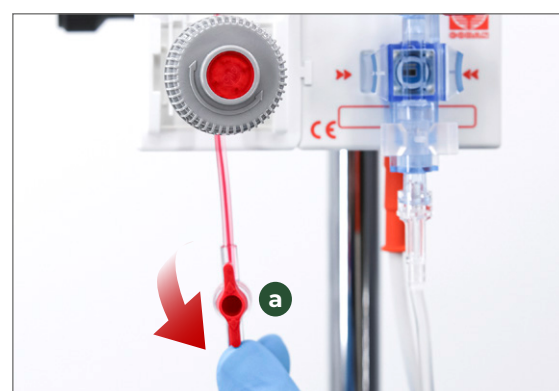

2 Otevřete 1cestný kohout.



3 Rezervoár pomalu zcela zavřete otáčením doprava.

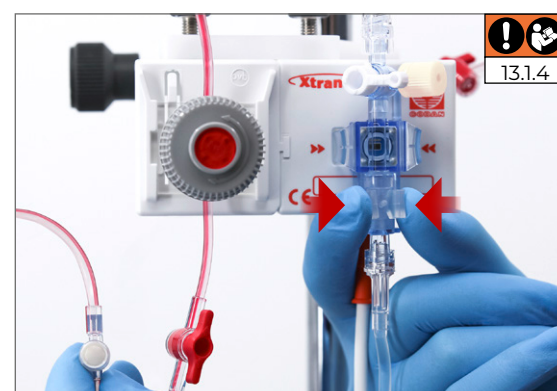

4 Propláchněte systém ABSS.



5 Kontrola: Zkontrolujte měření tlaku a zobrazení na monitoru.



Tato Quick Guide poskytuje informace o nejdůležitějších krocích a není náhradou úplného návodu k použití. Věnujte pozornost informacím o použití v souladu s určením, jakož i výstražným a bezpečnostním pokynům v návodu k použití a bezpodmínečně je dodržujte. Pokyny v jednotlivých krocích se vztahují k příslušné kapitole a příslušným výstražným pokynům v návodu k použití. V případě zanedbání/nedodržování existují značná bezpečnostní rizika pro pacienty, uživatele i třetí strany. Dodržujte hygienické směrnice zařízení.