


I. Priprema / punjenje ABSS



Set

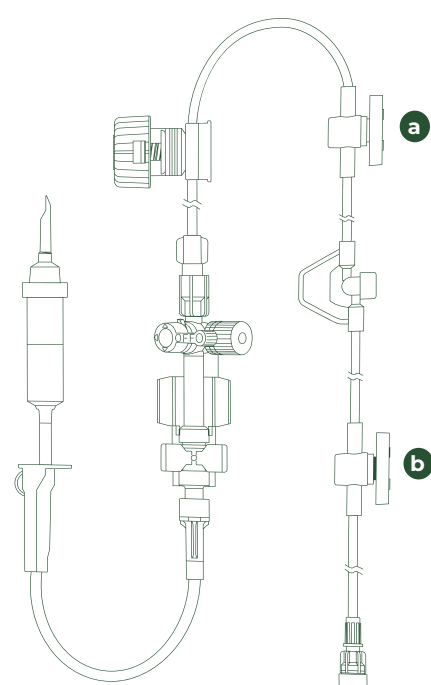

1 Napunite set za mjerenje tlaka.

Spremnik



2 Tijekom punjenja spremnik polako odvrnite za 3/4 okreta (270°) i zatim ga ponovno vratite natrag.

Mintavételi nyílást




3 Töltse meg teljesen a mintavételi nyílást, és távolítsa el belőle a légbuborékokat.

II. Uzimanje uzorka krvi ABSS



1 Dezinficirajte mjesto uzimanja uzorka. Obratite pozornost na vrijeme djelovanja!

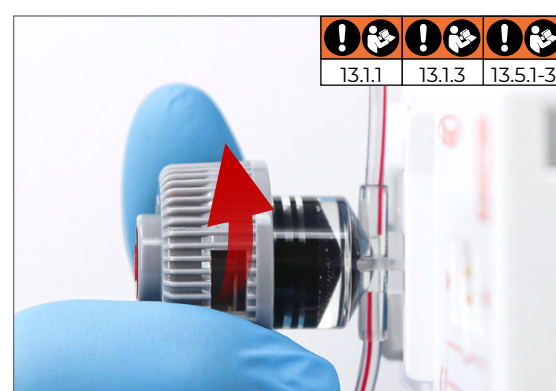

2 Spremnik polako odvrnite u cijelosti okretanjem ulijevo.



3 Zatvorite 1-putni ventil.



4 Spojite spremnik za uzimanje uzorka krvi s adapterom za uzimanje uzorka krvi.



5 Punktirajte s pomoću adaptera za uzimanje uzorka zajedno sa uzimanje uzorka krvi.



6 Povucite uzorak krvi.



7 Zatvorite 1-putni ventil.




8 Skinite adapter za uzimanje uzorka sa spremnikom za uzimanje uzorka krvi.




9 Dezinficirajte mjesto uzimanja uzorka.

III. Ponovna uspostava infuzije i ispiranje

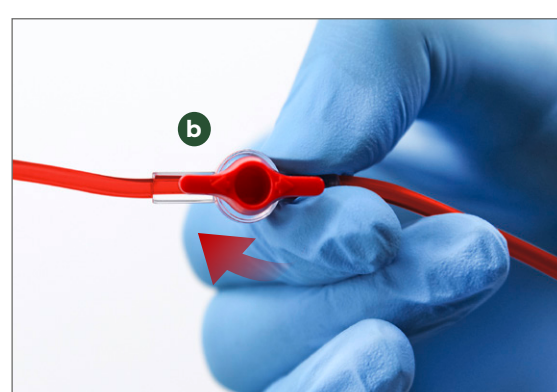


1 Otvorite 1-putni ventil.

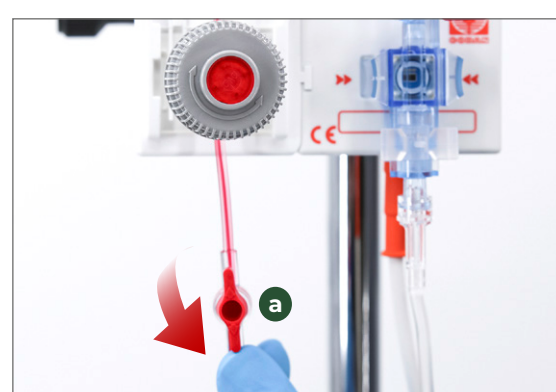

2 Otvorite 1-putni ventil.



3 Spremnik polako vratite natrag u cijelosti okretanjem udesno.

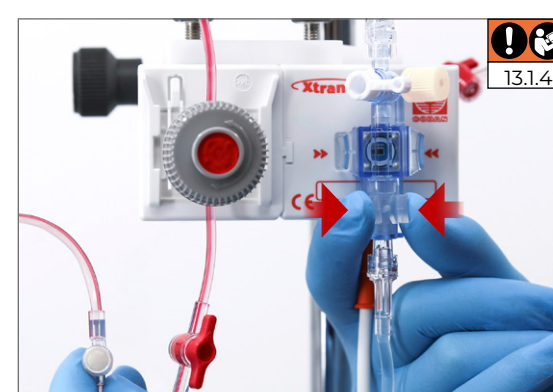

4 Isperite ABSS.



5 Kontrola: Provjerite mjerenje tlaka i prikaz na monitoru.



Ove kratke upute („Quick Guide“) informiraju vas o najvažnijim koracima u postupanju i ne zamjenjuju poštovanje uputa za uporabu. Obavezno uvažite i primjenjujte informacije o namjenskoj uporabi kao i upozorenja te sigurnosne upute iz uputa za uporabu. Upute u koracima za postupanje odnose se na pripadajuće poglavlje i pojedina upozorenja iz uputa za uporabu. Ako se ne poštuju ili ne slijede upute, postoje značajni sigurnosni rizici za pacijenta, korisnika i treće osobe. Pridržavajte se higijenskih smjernica svoje ustanove.