



I. Pregătire / umplere ABSS

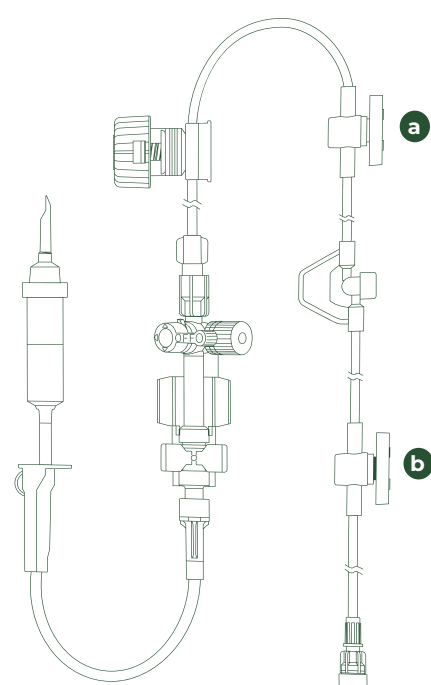

Set

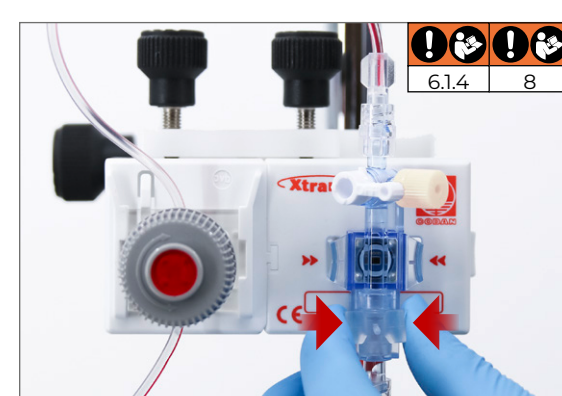

1 Umpleți setul de măsurare a presiunii.

Rezervor



2 În timpul umplerii, deschideți rezervorul prin rotire lentă cu 3/4 de rotație (270°) și închideți-l prin rotire înapoi.

Port de prelevare




3 Amorsați complet portul de prelevare având grijă să nu se formeze bule de aer.

II. Recoltare sânge ABSS



1 Dezinfectați locul recoltării. Respectați durata de acționare!

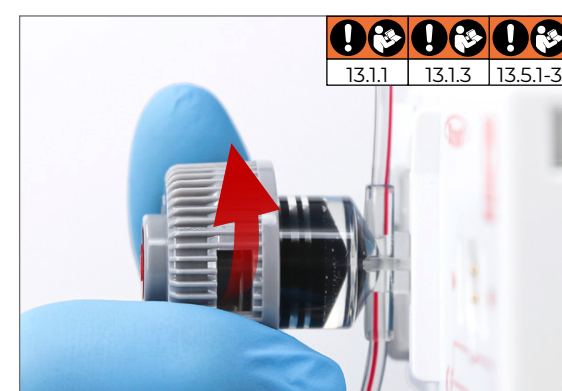

2 Deschideți complet rezervorul rotind lent spre stânga.



3 Închideți robinetul cu 1 cale.



4 Conectați recipientul de recoltare cu adaptorul de recoltare.



5 Perforați adaptorul de recoltare, inclusiv recipientul de recoltare.



6 Extragerea probei de sânge.



7 Închideți robinetul cu 1 cale.




8 Scoateți adaptorul de recoltare cu recipientul de recoltare.




9 Dezinfectați locul recoltării.

III. Reperfuzare și clătire

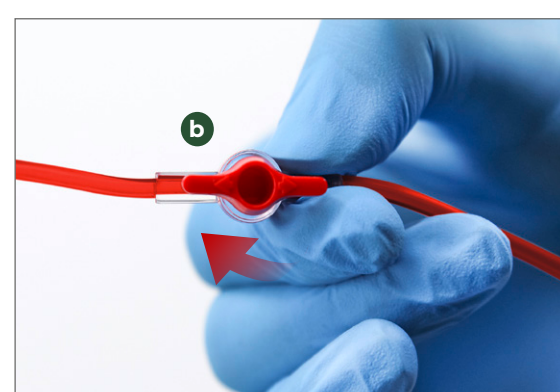


1 Deschideți robinetul cu 1 cale.

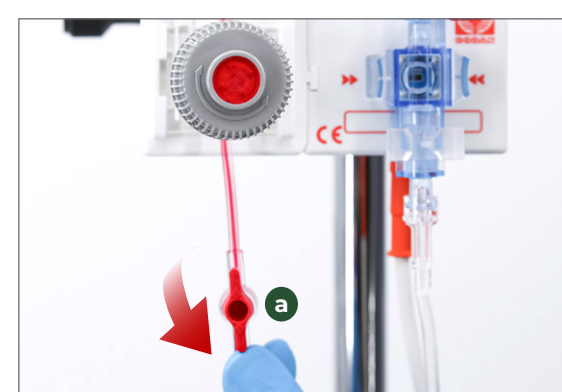

2 Deschideți robinetul cu 1 cale.



3 Închideți complet rezervorul rotind lent spre dreapta.

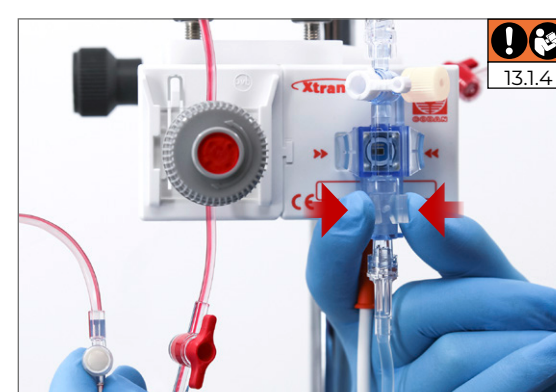

4 Spălați ABSS.



5 Control: Verificați măsurarea presiunii și afișajul pe monitor.



Acest Quick Guide vă informează cu privire la pașii de acțiune cei mai importanți și nu înlocuiește respectarea instrucțiunilor de utilizare. Vă rugăm să țineți cont și să urmați neapărat informațiile cu privire la utilizarea propusă, precum și indicațiile de avertizare și de siguranță din instrucțiunile de utilizare. Indicațiile din pașii de acțiune se referă la capitolul aferent și la indicațiile de avertizare respective din instrucțiunile de utilizare. Nerespectarea/neurmarea acestora poate genera riscuri de siguranță considerabile pentru pacient, utilizator și terțe persoane. Respectați directivele de igienă ale instituției dvs.