


I. ABSS Sagatavošanās / uzpildīšana



Komplekts

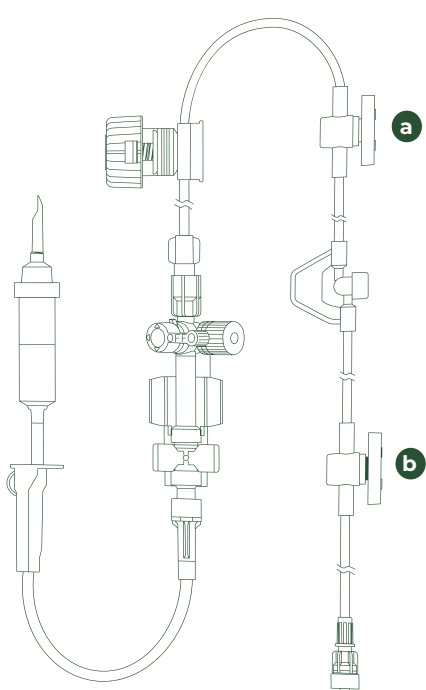

1 Uzpildiet spiediena mērīšanas komplektu.

Rezervuārs



2 Uzpildīšanas laikā lēnām uzskrūvējiet rezervuāru par 3/4 apgrieziena (270°) un atkal pagrieziet atpakaļ.

Parauga ņemšanas ports




3 Pilnībā uzpildiet paraugu ņemšanas portu un pārļiecinieties, ka tajā nav gaisa burbuļu.


II. Asins ņemšanas ABSS



1 Dezinficējiet asins ņemšanas vietu. Ievērojiet iedarbības laiku!

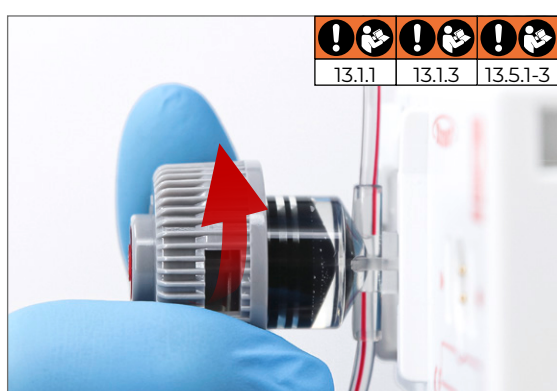

2 Pilnībā uzskrūvējiet rezervuāru, griežot pa kreisi.

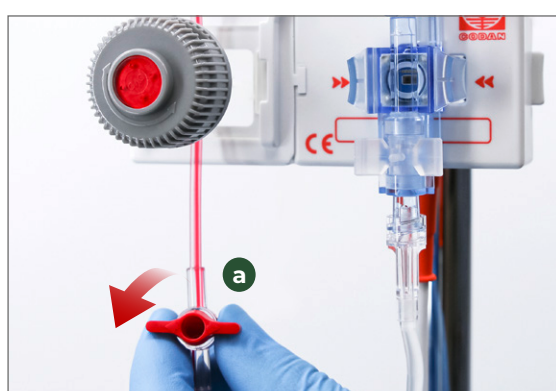

3 Aizveriet 1 virziena krānu.



4 Savienojiet parauga tvertni ar adapteri.



5 Punktējiet adapteri ar parauga tvertni.



6 Asins parauga ievilkšana.



7 Aizveriet 1 virziena krānu.




8 Noņemiet adapteri ar parauga tvertni.




9 Dezinficējiet asins ņemšanas vietu.


III. Reinfūzija un skalošana

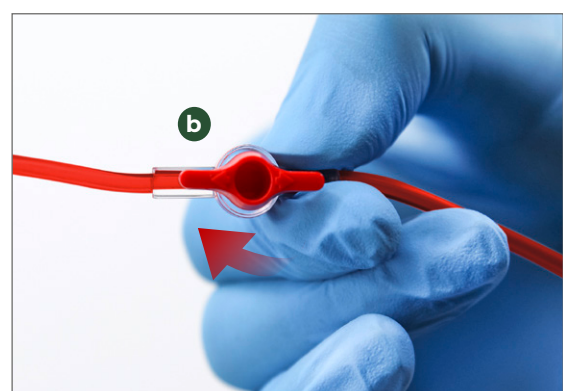

1 Atveriet 1 virziena krānu.

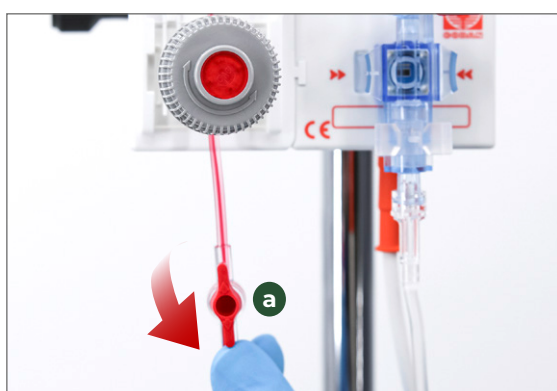

2 Atveriet 1 virziena krānu.

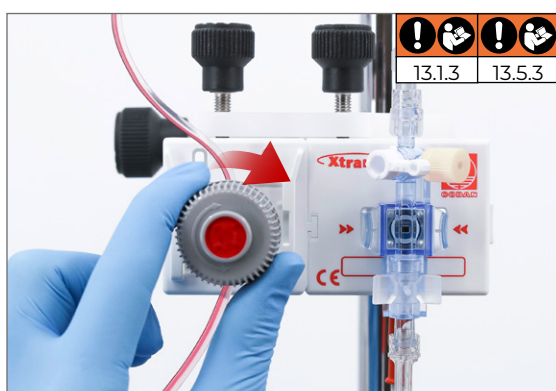

3 Lēnām atskrūvējiet rezervuāru, griežot uz labo pusi.



4 Izskalojiet ABSS.



5 Kontrolē: Spiediena mērījums un rādījuma pārbaude monitorā.



Šis Quick Guide informē par svarīgākajām darbībām un neaizstāj lietošanas pamācības ievērošanu. Noteikti ņemiet vērā un ievērojiet lietošanas pamācībā sniegto informāciju par paredzēto lietošanu, kā arī brīdinājuma un drošības norādījumus. Norādījumi darbībā attiecas uz attiecīgo nodaļu un attiecīgajiem brīdinājuma norādījumiem lietošanas pamācībā. Neievērošanas gadījumā pastāv ievērojami drošības riski pacientam, lietotājam un trešajām personām. Ievērojiet savas iestādes higiēnas vadlīnijas.

