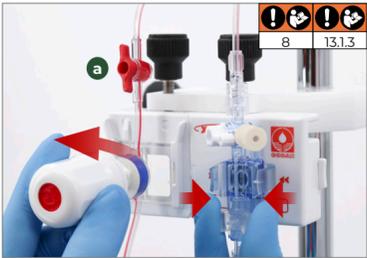
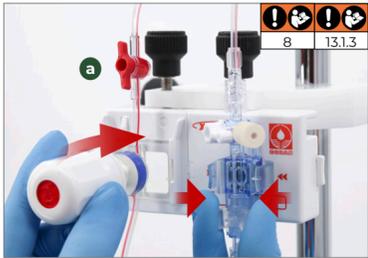
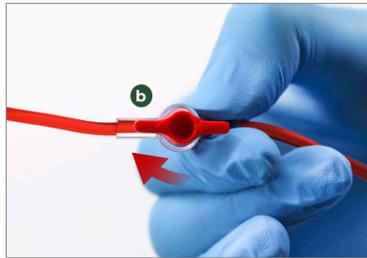




## I. Vorbereitung / Befüllung ABSS<sup>XL</sup>

Set	Reservoir	Entnahmeport
		
1 Druckmess-Set befüllen.	2 Während des Befüllens das Reservoir langsam um eine 3/4 Umdrehung (270°) aufdrehen und wieder zurückdrehen.	3 Entnahmeport vollständig und blasenfrei befüllen.

## II. Blutentnahme ABSS<sup>XL</sup>

				
1 Entnahmestelle desinfizieren. Einwirkzeit beachten!	2 1-Wege-Hahn schließen.	3 Reservoir langsam durch Linksdrehung vollständig aufdrehen.	4 Entnahmebehälter mit dem Entnahmeadapter konnektieren.	5 Entnahmeadapter inkl. Entnahmebehälter punktieren.
				
6 Aufziehen der Blutprobe.	7 1-Wege-Hahn schließen.	8 Entnahmeadapter mit dem Entnahmebehälter abziehen.	9 Entnahmestelle desinfizieren.	10 1-Wege-Hahn öffnen.

## III. Reinfusion & Spülen

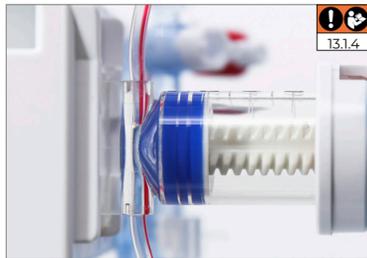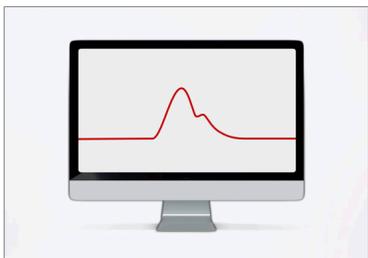				
1 Reservoir langsam durch Rechtsdrehung vollständig zurückdrehen.	2 1-Wege-Hahn öffnen.	3 ABSS <sup>XL</sup> spülen.	4 Reservoir langsam um eine 3/4 Umdrehung (270°) aufdrehen und zurückdrehen.	5 Sichtkontrolle: Spülen, bis alle Blutrückstände entfernt sind.
				
6 ABSS <sup>XL</sup> spülen.	7 Kontrolle: Druckmessung & Anzeige am Monitor prüfen.			



Dieser Quick Guide informiert Sie über die wichtigsten Handlungsschritte und ersetzt nicht das Beachten der Gebrauchsanweisung. Beachten und befolgen Sie unbedingt die Informationen über den bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie die Warn- und Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung. Die Hinweise in den Handlungsschritten beziehen sich auf das zugehörige Kapitel und die jeweiligen Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung. Bei Nichtbeachten/-befolgen bestehen erhebliche Sicherheitsrisiken für den Patienten, Anwender und Dritte. Beachten Sie die Hygienerichtlinien Ihrer Einrichtung.