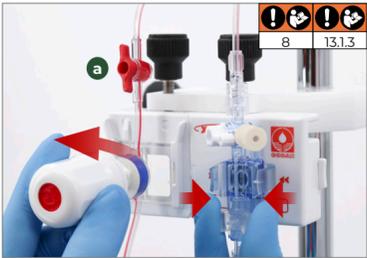
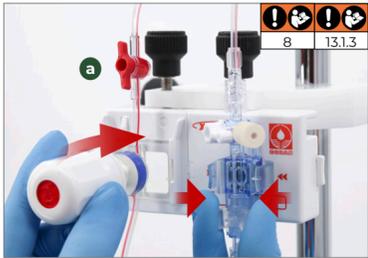
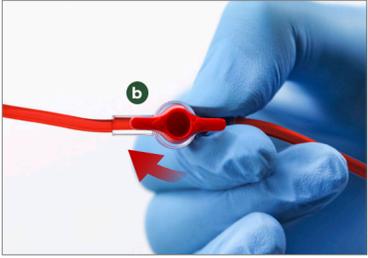



I. Preparazione / riempimento ABSS^{XL}

Set	Serbatoio	Punto di prelievo
 <p>1 Riempire il set di misurazione della pressione.</p>	 <p>2 Durante il riempimento, aprire lentamente il serbatoio a 3/4 di giro (270°) in senso antiorario e richiuderlo nuovamente in senso orario.</p>	 <p>3 Riempire completamente e senza formare bolle d'aria il punto di prelievo.</p>

II. Prelievo di sangue ABSS^{XL}

 <p>1 Disinfettare il punto di prelievo. Rispettare il tempo di esposizione!</p>	 <p>2 Chiudere il rubinetto a 1 via.</p>	 <p>3 Aprire lentamente il serbatoio ruotando completamente in senso antiorario.</p>	 <p>4 Collegare il contenitore di raccolta all'adattatore per il prelievo.</p>	 <p>5 Forare l'adattatore per il prelievo incl. il contenitore di raccolta.</p>
 <p>6 Prelevare il campione di sangue.</p>	 <p>7 Chiudere il rubinetto a 1 via.</p>	 <p>8 Estrarre l'adattatore per il prelievo con il contenitore di raccolta.</p>	 <p>9 Disinfettare il punto di prelievo.</p>	 <p>10 Aprire il rubinetto a 1 via.</p>

III. Reinfusione e lavaggio

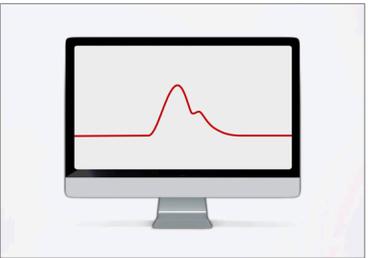 <p>1 Richiudere lentamente il serbatoio ruotando completamente in senso orario.</p>	 <p>2 Aprire il rubinetto a 1 via.</p>	 <p>3 Lavare il sistema ABSS^{XL}.</p>	 <p>4 Aprire lentamente il serbatoio a 3/4 di giro (270°) in senso antiorario e richiuderlo nuovamente in senso orario.</p>	 <p>5 Controllo visivo: Lavare fino a rimuovere tutti i residui di sangue.</p>
 <p>6 Lavare il sistema ABSS^{XL}.</p>	 <p>7 Controllo: Verificare la misurazione della pressione e le indicazioni sul monitor.</p>			



Questa Quick Guide serve a informare gli utilizzatori sui passaggi importanti, ma non sostituisce l'osservanza delle istruzioni per l'uso. È indispensabile osservare e seguire le informazioni relative all'uso previsto, nonché le avvertenze e le istruzioni di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso. Le istruzioni sui passaggi fanno riferimento al capitolo corrispondente e alle rispettive avvertenze nelle istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle indicazioni può comportare notevoli rischi per la sicurezza del paziente, dell'utilizzatore e di terzi. Osservare le linee guida igieniche della struttura sanitaria.