





I. Voorbereiden / vullen met ABSS^{XL}

Set

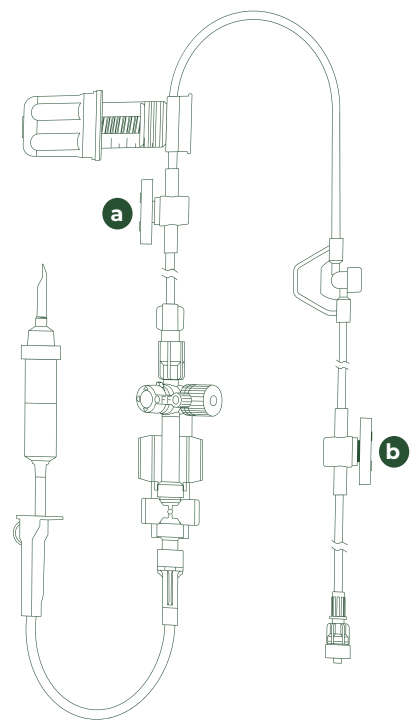

1 Vul de drukmetingset.

Reservoir

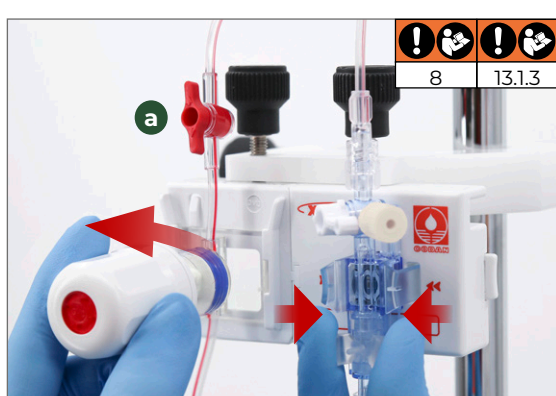

2 Draai tijdens het vullen het reservoir langzaam driekwartslag (270°) open door naar links te draaien en draai het weer terug.

Afnamepoort



3 Vul de afnamepoort volledig zonder luchtbelletjes.


II. Bloedafname ABSS^{XL}



1 Desinfecteer de afnameplek. Let op de inwerktijd!



2 Sluit de 1-wegkraan.

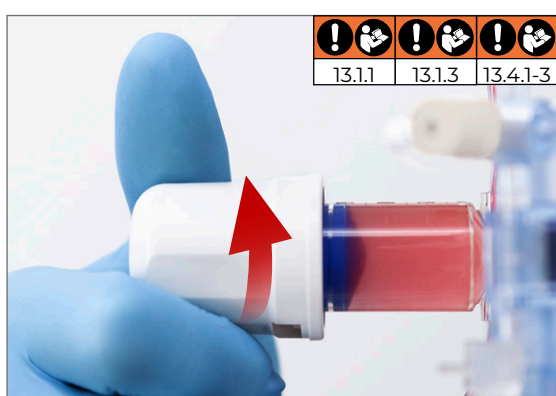

3 Draai het reservoir langzaam helemaal open door naar links te draaien.



4 Verbind de afnamecontainer met de afname-adapter.



5 Sluit de afname-adapter incl. afnamecontainer aan op de afnamepoort.




6 Trek het bloedmonster op.




7 Sluit de 1-wegkraan.



8 Ontkoppel de afnameadapter met de afnamecontainer.

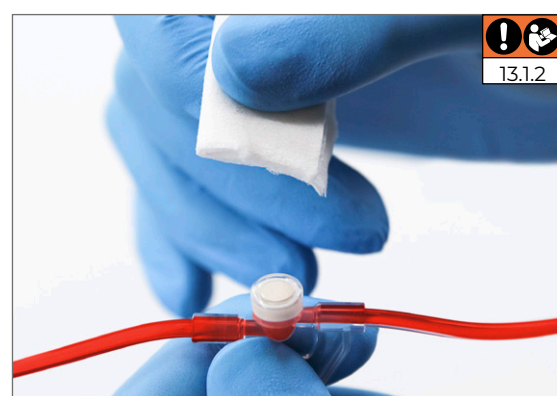

9 Desinfecteer de afnameplek.

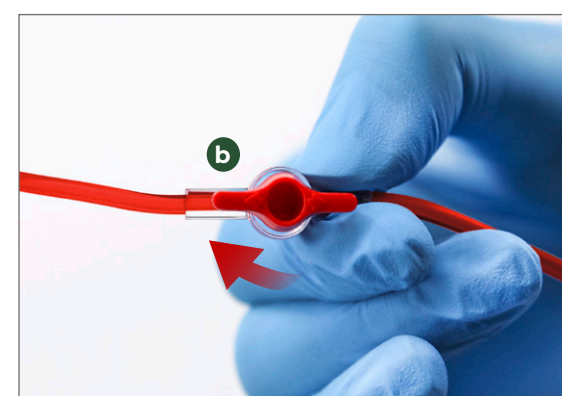

10 Open de 1-wegkraan.


III. Reïfusie & spoelen




1 Draai het reservoir langzaam helemaal terug door naar rechts te draaien.




2 Open de 1-wegkraan.

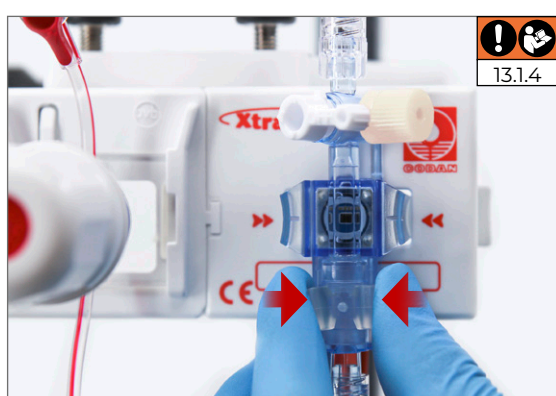


3 Spoel de ABSS^{XL}.

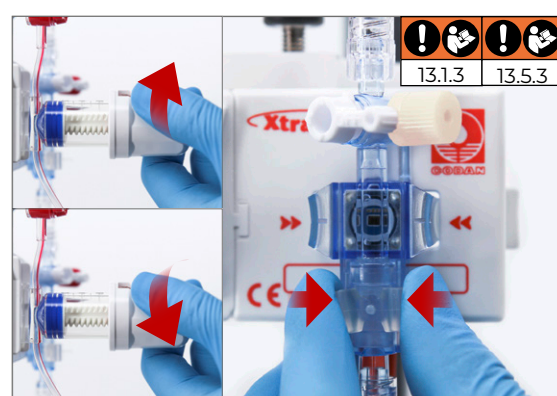

4 Draai het reservoir langzaam driekwartslag (270°) open door naar links te draaien en draai weer terug.

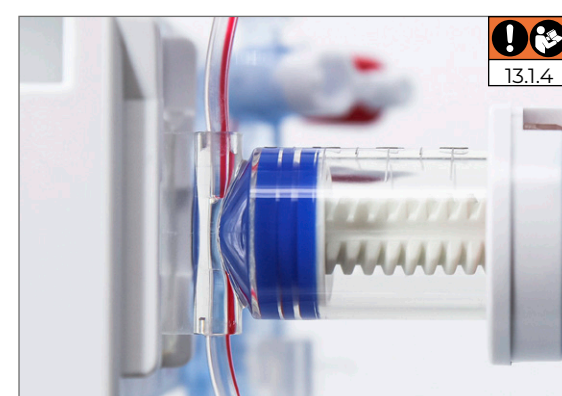

5 Visuele controle: spoelen tot alle bloedresten zijn verwijderd.

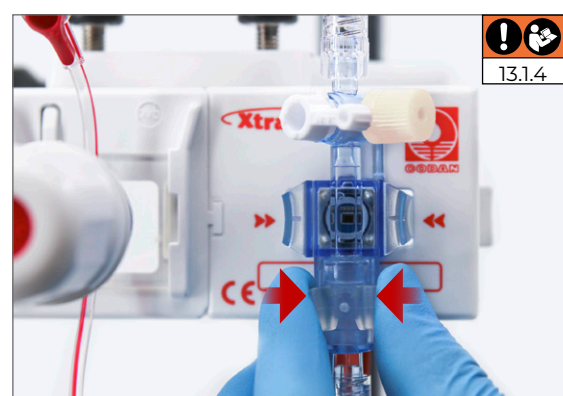

6 Spoel de ABSS^{XL}.



7 Controle: controleer drukmeting & aanduiding op de monitor.



Deze Quick Guide informeert u over de belangrijkste handlingsstappen en is geen vervanging voor de inachtneming van de gebruiksaanwijzing. U dient de informatie over het beoogde gebruik evenals de waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing absoluut in acht te nemen en op te volgen. De aanwijzingen in de handlingsstappen hebben betrekking op het bijbehorende hoofdstuk en de desbetreffende waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing. Als deze aanwijzingen niet in acht genomen/opgevolgd worden, bestaan er aanzienlijke veiligheidsrisico's voor patiënten, gebruikers en derden. Neem goed nota van de hygiënevoorschriften van uw instelling.