

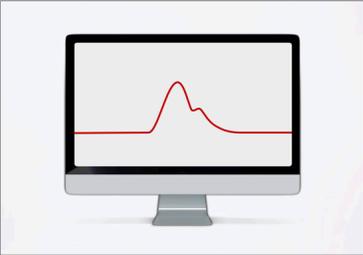
## I. Preparazione / riempimento CLC

Set	Classic Blood Sampling System				Set
					
1 Riempire il set di misurazione della pressione.	2 Portare il rubinetto a 4 vie nella posizione di lavaggio.	3 Riempire completamente il rubinetto a 4 vie.	4 Avvitare il nuovo tappo terminale non ventilato/tappo combinato.	5 Portare il rubinetto a 4 vie nella posizione di misurazione della pressione.	6 Riempire completamente il set di misurazione della pressione.

## II. Prelievo di sangue CLC

				
1 Rimuovere e smaltire il tappo terminale/tappo combinato.	2 Collegare saldamente il contenitore di raccolta.	3 Portare il rubinetto a 4 vie in posizione di raccolta.	4 Prelevare il sangue misto.	5 Portare il rubinetto a 4 vie nella posizione a 45°.
				
6 Scollegare e smaltire il contenitore di raccolta.	7 Collegare saldamente il nuovo contenitore di raccolta.	8 Portare il rubinetto a 4 vie nella posizione di prelievo.	9 Prelevare il campione di sangue.	10 Portare il rubinetto a 4 vie nella posizione a 45°.
				
11 Scollegare il contenitore di raccolta con sangue puro.	12 Portare il rubinetto a 4 vie nella posizione di lavaggio.			

## III. Lavare

				
1 Lavare i residui di sangue dal rubinetto a 4 vie fino alla rimozione.	2 Avvitare il nuovo tappo terminale non ventilato/tappo combinato.	3 Portare il rubinetto a 4 vie nella posizione di misurazione della pressione.	4 Lavare il set di misurazione della pressione.	5 Controllo: Verificare la misurazione della pressione e le indicazioni sul monitor.



Questa Quick Guide serve a informare gli utilizzatori sui passaggi importanti, ma non sostituisce l'osservanza delle istruzioni per l'uso. È indispensabile osservare e seguire le informazioni relative all'uso previsto, nonché le avvertenze e le istruzioni di sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso. Le istruzioni sui passaggi fanno riferimento al capitolo corrispondente e alle rispettive avvertenze nelle istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle indicazioni può comportare notevoli rischi per la sicurezza del paziente, dell'utilizzatore e di terzi. Osservare le linee guida igieniche della struttura sanitaria.