

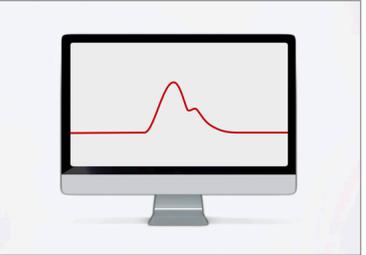
I. Preparación / llenado CLC

Set	Classic Blood Sampling System				Set
					
1 Llene el set de medición de presión.	2 Ajuste la llave de 4 vías en la posición de irrigación.	3 Llene completamente la llave de 4 vías.	4 Enrosque un nuevo tapón final/tapón combinado no ventilado.	5 Ajuste la llave de 4 vías en la posición de medición de presión.	6 Llene completamente el set de medición de presión.

II. Extracción de sangre CLC

				
1 Retire el tapón final/tapón combinado y deséchelo.	2 Conecte firmemente el recipiente de muestras.	3 Ajuste la llave de 4 vías en la posición de extracción.	4 Extraiga la sangre mezclada.	5 Ajuste la llave de 4 vías en la posición de 45°.
				
6 Desconecte el recipiente de muestras y deséchelo.	7 Conecte firmemente un nuevo recipiente de muestras.	8 Ajuste la llave de 4 vías en la posición de extracción.	9 Extraiga la muestra de sangre.	10 Ajuste la llave de 4 vías en la posición de 45°.
				
11 Desconecte el recipiente de muestras con la sangre pura.	12 Ajuste la llave de 4 vías en la posición de irrigación.			

III. Irrigación

				
1 Irrigue hasta que se eliminen los restos de sangre de la llave de 4 vías.	2 Enrosque un nuevo tapón final/tapón combinado no ventilado.	3 Ajuste la llave de 4 vías en la posición de medición de presión.	4 Irrigue el set de medición de presión.	5 Control: compruebe la medición de presión y la indicación en el monitor.



Esta Quick Guide le informa sobre los pasos de manejo más importantes y no sustituye el cumplimiento de las instrucciones de uso. Observe y cumpla la información sobre el uso previsto y las indicaciones de advertencia y seguridad de las instrucciones de uso. Las indicaciones de los pasos de manejo se refieren al capítulo relevante y a las indicaciones de advertencia correspondientes de las instrucciones de uso. En caso de incumplimiento/inobservancia, existen considerables riesgos de seguridad para el paciente, el usuario y terceros. Observe las directrices de higiene de su centro sanitario.