
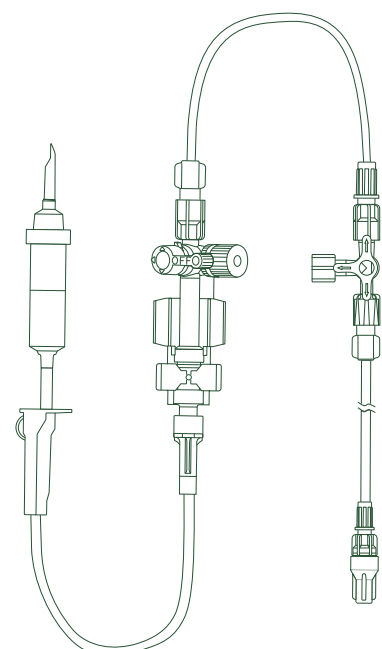


I. Preparação / enchimento CLC

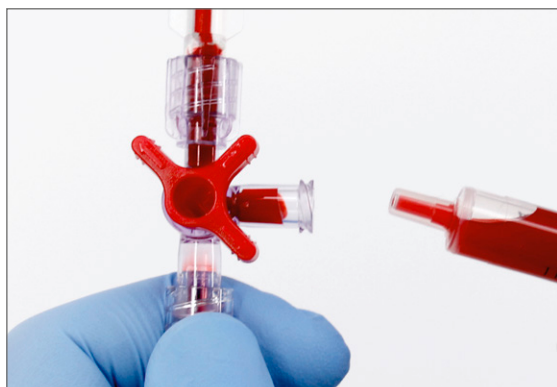

Conjunto	Classic Blood Sampling System				Conjunto
					
1 Encher o conjunto de medição da pressão.	2 Colocar a torneira de 4 vias na posição de lavagem.	3 Encher completamente a torneira de 4 vias.	4 Enroscar uma nova tampa final não ventilada/tampa combinada.	5 Colocar a torneira de 4 vias na posição de medição de pressão.	6 Encher completamente o conjunto de medição da pressão.

II. Recolha de sangue CLC

				
1 Remover e eliminar a tampa final/tampa combinada.	2 Conectar bem o recipiente de recolha.	3 Colocar a torneira de 4 vias na posição de recolha.	4 Retirar sangue misto.	5 Colocar a torneira de 4 vias na posição de 45°.
				
6 Desconectar e eliminar o recipiente de recolha.	7 Conectar bem um novo recipiente de recolha.	8 Colocar a torneira de 4 vias na posição de recolha.	9 Retirar amostra de sangue.	10 Colocar a torneira de 4 vias na posição de 45°.
				
11 Desconectar o recipiente de recolha com sangue não adulterado.	12 Colocar a torneira de 4 vias na posição de lavagem.			

III. Irrigar

				
1 Lavar até que os restos de sangue sejam removido da torneira de 4 vias.	2 Enroscar uma nova tampa final não ventilada/tampa combinada.	3 Colocar a torneira de 4 vias na posição de medição de pressão.	4 Lavar o conjunto de medição da pressão.	5 Controlo: Verificar a medição da pressão e a indicação no monitor.



Este Quick Guide informa-o sobre os passos de operação mais importantes e não substitui a observância das instruções de utilização. Observe e respeite impreterivelmente as informações sobre a utilização prevista, assim como os avisos e indicações de segurança nas instruções de utilização. As indicações nos passos de operação referem-se ao capítulo correspondente e aos respetivos avisos nas instruções de utilização. O incumprimento/desrespeito destas indicações constitui um risco de segurança substancial para os doentes, utilizadores e terceiros. Respeite as regras de higiene da sua instituição.