
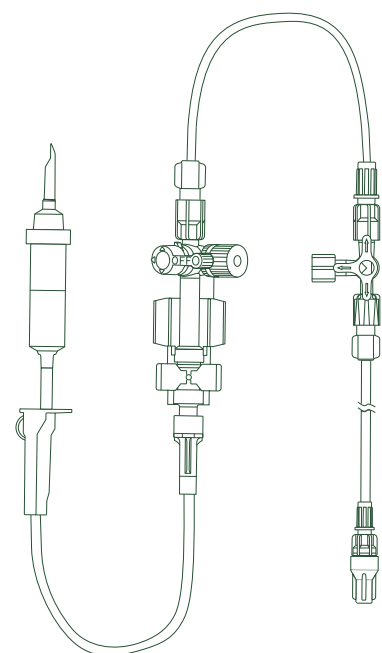
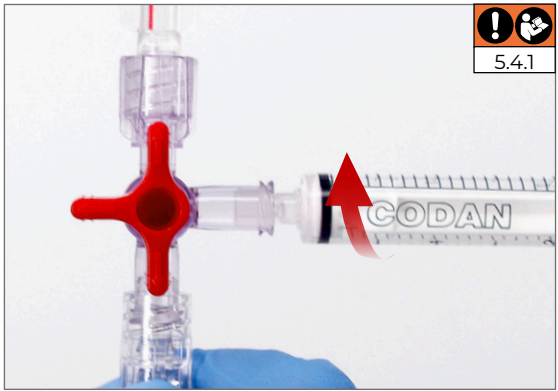
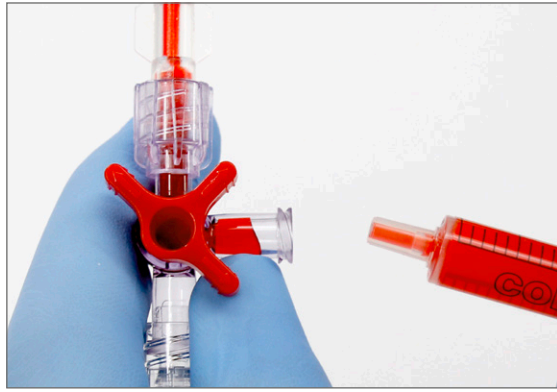
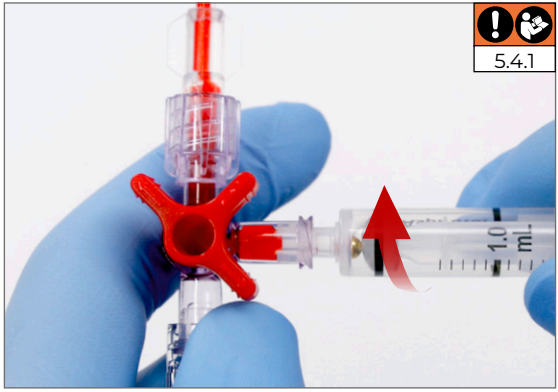
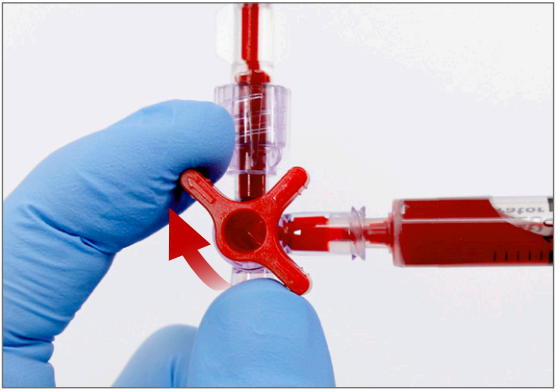
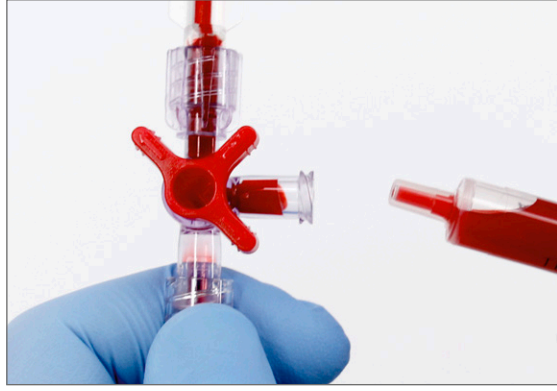


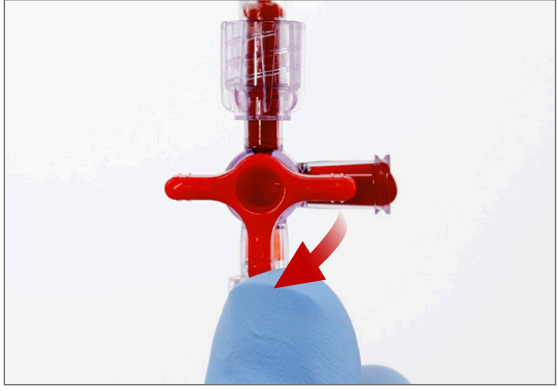


I. Voorbereiden / vullen CLC

Set	Classic Blood Sampling System				Set
					
1 Vul de drukmetingset.	2 Zet de 4-wegkraan in spoelstand.	3 Vul de 4-wegkraan volledig.	4 Schroef het nieuwe onbeluchte eindkapje/combikapje erop.	5 Zet de 4-wegkraan in drukmetingsstand.	6 Vul de drukmetingset volledig.

II. Bloedafname CLC

				
1 Verwijder het eindkapje/combikapje en verwijder het als afval.	2 Sluit de afnamecontainer goed aan.	3 Zet de 4-wegkraan in afnamestand.	4 Trek het gemengde bloed op.	5 Zet de 4-wegkraan in 45°-stand.
				
6 Ontkoppel de afnamecontainer en verwijder deze als afval.	7 Sluit de nieuwe afnamecontainer goed aan.	8 Zet de 4-wegkraan in afnamestand.	9 Trek het bloedmonster op.	10 Zet de 4-wegkraan in 45°-stand.
				
11 Ontkoppel de afnamecontainer met zuiver bloed.	12 Zet de 4-wegkraan in spoelstand.			

III. Spoelen

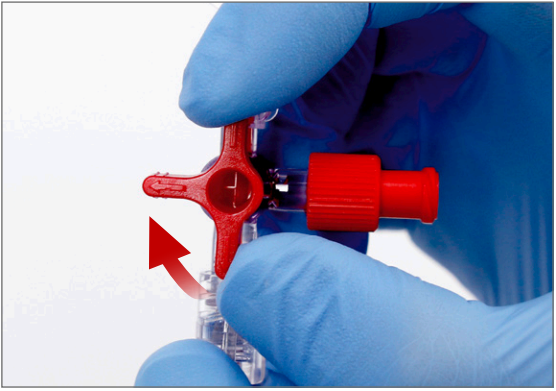				
1 Spoel tot bloedresten uit de 4-wegkraan zijn verwijderd.	2 Schroef het nieuwe onbeluchte eindkapje/combikapje erop.	3 Zet de 4-wegkraan in drukmetingsstand.	4 Spoel de drukmetingset.	5 Controle: controleer drukmeting & aanduiding op de monitor.



Deze Quick Guide informeert u over de belangrijkste handlingsstappen en is geen vervanging voor de inachtneming van de gebruiksaanwijzing. U dient de informatie over het beoogde gebruik evenals de waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing absoluut in acht te nemen en op te volgen. De aanwijzingen in de handlingsstappen hebben betrekking op het bijbehorende hoofdstuk en de desbetreffende waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing. Als deze aanwijzingen niet in acht genomen/opgevolgd worden, bestaan er aanzienlijke veiligheidsrisico's voor patiënten, gebruikers en derden. Neem goed nota van de hygiënevoorschriften van uw instelling.