
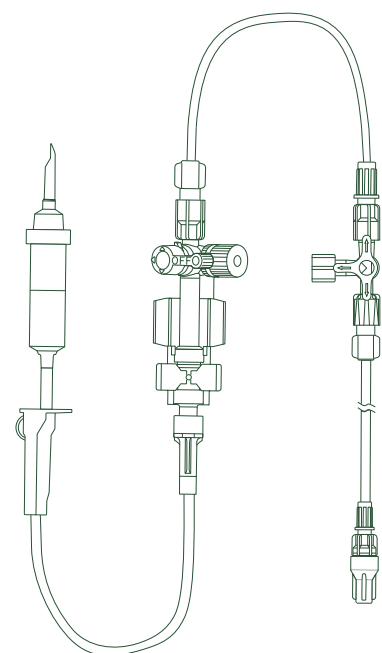


I. Klargøring / påfyldning CLC

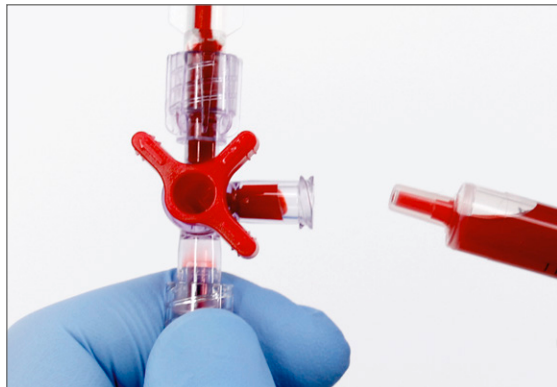


Sæt	Classic Blood Sampling System					Sæt
						
1 Påfyld trykmålesættet.	2 Placer 4-vejshanen i skyllepositionen.	3 Påfyld 4-vejshanen helt.	4 Skru en ny ikke-ventileret endekappe/kombikappe på.	5 Placer 4-vejshanen i trykmålepositionen.	6 Påfyld trykmålesættet helt.	

II. Blodprøvetagning CLC

				
1 Fjern og bortskaf endekappen/kombikappen.	2 Tilslut beholderen fast.	3 Placer 4-vejshanen i prøvetagningsposition.	4 Optræk blandingsblodet.	5 Placer 4-vejshanen i 45°-position.
				
6 Frakobl og bortskaf beholderen.	7 Tilslut en ny beholder fast.	8 Placer 4-vejshanen i prøvetagningspositionen.	9 Optræk blodprøven.	10 Placer 4-vejshanen i 45°-position.
				
11 Frakobl beholderen med rent blod.	12 Placer 4-vejshanen i skyllepositionen.			

III. Skylning

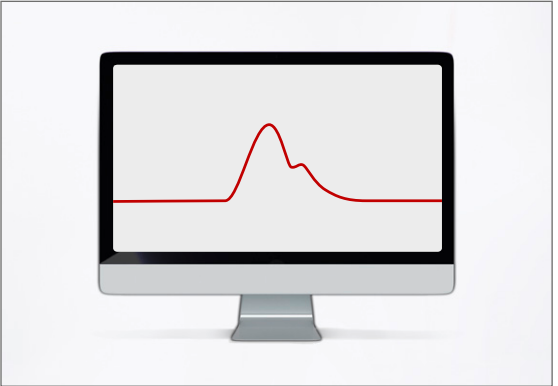				
1 Skyl, indtil blodresterne er fjernet fra 4-vejshanen.	2 Skru en ny ikke-ventileret endekappe/kombikappe på.	3 Placer 4-vejshanen i trykmålepositionen.	4 Skyl trykmålesættet.	5 Kontrol: Kontrollér trykmålingen og visningen på monitoren.



Denne Quick Guide informerer dig om de vigtigste handlingstrin og erstatter ikke overholdelsen af brugsanvisningen. Overhold og følg altid oplysningerne om den tilsigtede brug samt advarslerne og sikkerhedsanvisningerne i brugsanvisningen. Anvisningerne i handlingstrinnene refererer til det tilhørende kapitel og de pågældende advarsler i brugsanvisningen. Ved tilsidesættelse/overtrædelse er der alvorlige sikkerhedsrisici for patienten, brugeren og tredjemand. Overhold hygiejneretningslinjerne på dit hospital.