
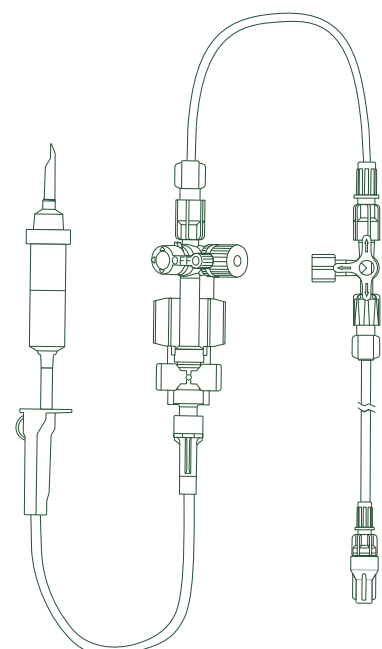
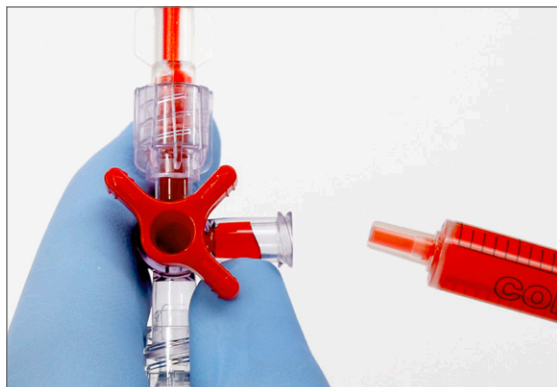


I. Forberedelse / fylling CLC

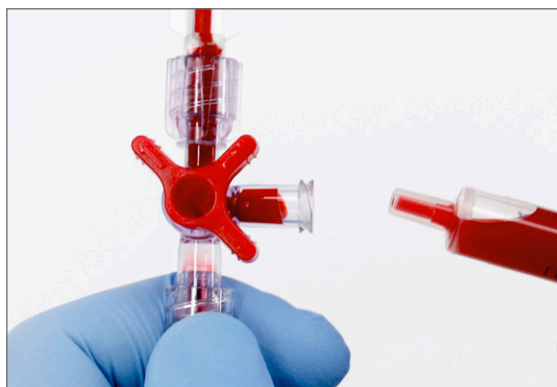

Sett	Classic Blood Sampling System				Sett
					
1 Fyll trykkmålingssettet.	2 Sett 4-veiskranen i skylleposisjon.	3 Fyll 4-veiskranen helt.	4 Skru på ny uventilert ende-hette/kombihette.	5 Sett 4-veiskranen i trykkmålingsposisjon.	6 Fyll trykkmålingssettet helt.

II. Blodprøvetaking CLC

				
1 Ta av ende-hetten/kombihetten og kast den.	2 Koble til prøvetakingsbeholderen.	3 Sett 4-veiskranen i prøvetakingsposisjon.	4 Trekk opp blandingsblod.	5 Sett 4-veiskranen i 45°-posisjon.
				
6 Koble fra og kast prøvetakingsbeholderen.	7 Koble til ny prøvetakingsbeholder.	8 Sett 4-veiskranen i prøvetakingsposisjon.	9 Uttak av blodprøven.	10 Sett 4-veiskranen i 45°-posisjon.
				
11 Koble fra prøvetakingsbeholderen med rent blod.	12 Sett 4-veiskranen i skylleposisjon.			

III. Spyle

				
1 Skyll bort alle blodrester fra 4-veiskranen.	2 Skru på ny uventilert ende-hette/kombihette.	3 Sett 4-veiskranen i trykkmålingsposisjon.	4 Skyll trykkmålingssettet.	5 Kontroll: Kontroller trykkmålingen og visningen på skjermen.



Denne Quick Guide inneholder kort informasjon om de viktigste handlingstrinnene og erstatter ikke bruksanvisningen. Les og følg informasjonen om forskriftsmessig bruk samt advarsler og sikkerhetsinformasjon i bruksanvisningen. Informasjonen i handlingstrinnene tar utgangspunkt i tilhørende kapittel inkludert advarsler i bruksanvisningen. Dersom den ikke følges, er det stor sikkerhetsrisiko for pasient, bruker og tredjepart. Følg hygieneretningslinjene som gjelder på din institusjon.