
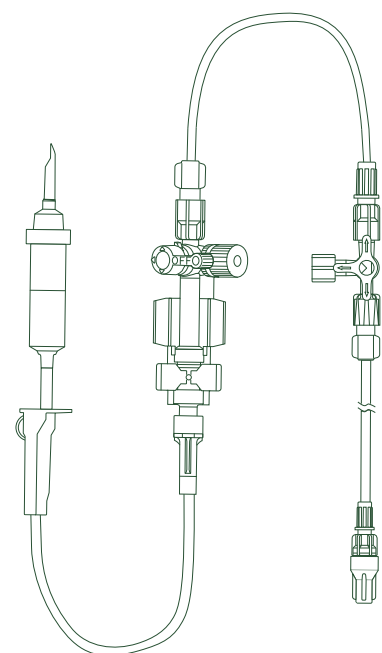


I. Příprava / plnění systému CLC

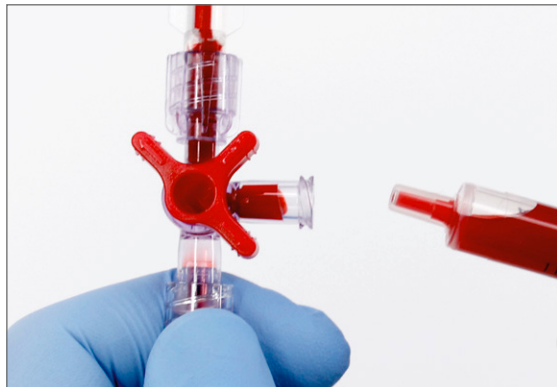


Sada	Classic Blood Sampling System				Sada
					
1 Naplňte soupravu k měření tlaku.	2 Uvedte 4cestný kohout do polohy pro vyplachování.	3 Zcela naplňte 4cestný kohout.	4 Našroubujte nové neodvětrávané víčko/kombinované víčko.	5 Uvedte 4cestný kohout do polohy pro měření tlaku.	6 Zcela naplňte soupravu k měření tlaku.

II. Odběr krve CLC

				
1 Neodvětrávané víčko/kombinované víčko odstraňte a zlikvidujte.	2 Odběrovou nádobku pevně připojte.	3 4cestný kohout uveďte do polohy pro odběr.	4 Proveďte odběr smíšené krve.	5 Uvedte 4cestný kohout do polohy 45°.
				
6 Odběrovou nádobku odpojte a zlikvidujte.	7 Pevně připojte novou odběrovou nádobku.	8 Uvedte 4cestný kohout do polohy odběr.	9 Proveďte odběr krve.	10 Uvedte 4cestný kohout do polohy 45°.
				
11 Odpojte odběrovou nádobku s čistou krví.	12 Uvedte 4cestný kohout do polohy pro vyplachování.			

III. Výplach

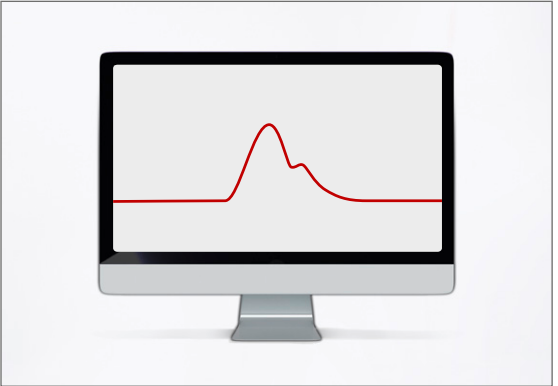				
1 Vyplachujte, dokud z 4cestného kohoutu neodstraníte zbytky krve.	2 Našroubujte nové neodvětrávané víčko/kombinované víčko.	3 Uvedte 4cestný kohout do polohy pro měření tlaku.	4 Vypláchněte soupravu k měření tlaku.	5 Kontrola: Zkontrolujte měření tlaku a zobrazení na monitoru.



Tato Quick Guide poskytuje informace o nejdůležitějších krocích a není náhradou úplného návodu k použití. Věnujte pozornost informacím o použití v souladu s určením, jakož i výstražným a bezpečnostním pokynům v návodu k použití a bezpodmínečně je dodržujte. Pokyny v jednotlivých krocích se vztahují k příslušné kapitole a příslušným výstražným pokynům v návodu k použití. V případě zanedbání/nedodržování existují značná bezpečnostní rizika pro pacienty, uživatele i třetí strany. Dodržujte hygienické směrnice zařízení.

