


I. Priprema / punjenje sustava CLC

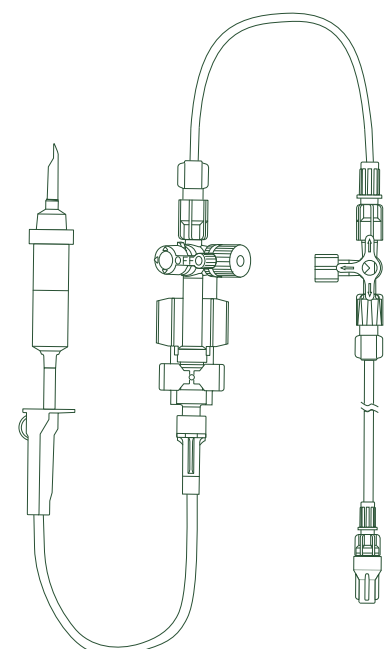

Set	Classic Blood Sampling System				Set
					
1 Napunite set za mjerenje tlaka.	2 Postavite 4-putni ventil u položaj za ispiranje.	3 4-putni ventil napunite u cijelosti.	4 Navrnite novu ne-ventiliranu završnu kapicu/kombiniranu kapicu.	5 Postavite 4-putni ventil u položaj za mjerenje tlaka.	6 Set za mjerenje tlaka napunite u cijelosti.

II. Sustav za uzimanje uzorka krvi CLC

				
1 Uklonite i zbrinite završnu kapicu/kombiniranu kapicu.	2 Čvrsto spojite spremnik za uzimanje uzorka krvi.	3 Postavite 4-putni ventil u položaj za uzimanje uzorka.	4 Povucite miješanu krv.	5 Postavite 4-putni ventil u položaj od 45°.
				
6 Odspojite i zbrinite spremnik za uzimanje uzorka krvi.	7 Čvrsto spojite novi spremnik za uzimanje uzorka krvi.	8 Postavite 4-putni ventil u položaj za uzimanje uzorka.	9 Povucite uzorak krvi.	10 Postavite 4-putni ventil u položaj od 45°.
				
11 Odspojite spremnik za uzimanje uzorka s čistom krvi.	12 Postavite 4-putni ventil u položaj za ispiranje.			

III. Ispiranje

				
1 Ispirite dok ne uklonite ostatke krvi iz 4-putnog ventila.	2 Navrnite novu neventiliranu završnu kapicu/kombiniranu kapicu.	3 Postavite 4-putni ventil u položaj za mjerenje tlaka.	4 Ispirite set za mjerenje tlaka.	5 Kontrola: Provjerite mjerenje tlaka i prikaz na monitoru.



Ove kratke upute („Quick Guide“) informirat će vas o najvažnijim koracima u postupanju i ne zamjenjuju poštovanje uputa za uporabu. Obavezno uvažite i primjenjujte informacije o namjenskoj uporabi kao i upozorenja te sigurnosne upute iz uputa za uporabu. Upute u koracima za postupanje odnose se na pripadajuće poglavlje i pojedina upozorenja iz uputa za uporabu. Ako se ne poštuju ili ne slijede upute, postoje značajni sigurnosni rizici za pacijenta, korisnika i treće osobe. Pridržavajte se higijenskih smjernica svoje ustanove.