
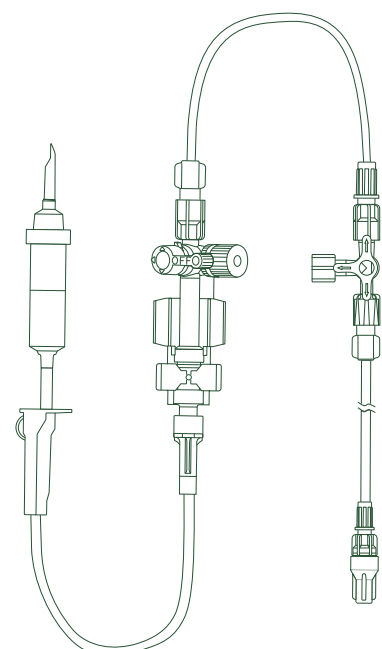


I. Sagatavošanās / CLC uzpildīšana

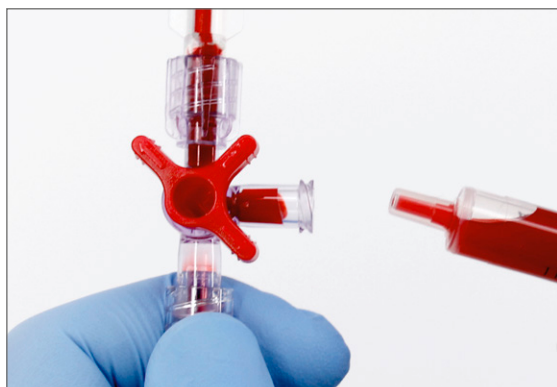

Komplekts	Classic Blood Sampling System					Komplekts
						
1 Uzpildiet spiediena mērīšanas komplektu.	2 Novietojiet 4 virzienu krānu skalošanas pozīcijā.	3 Pilnībā uzpildiet 4 virzienu krānu.	4 Uzskrūvējiet jaunu neventilētu gala vāciņu/kombinēto vāciņu.	5 Novietojiet 4 virzienu krānu spiediena mērīšanas pozīcijā.	6 Pilnībā uzpildiet spiediena mērīšanas komplektu.	

II. Asins ņemšanas CLC

				
1 Noņemiet un izmetiet gala vāciņu/kombinēto vāciņu.	2 Cieši pievienojiet parauga tvertni.	3 Novietojiet 4 virzienu krānu ņemšanas pozīcijā.	4 Ievelciet jauktās asinis.	5 Novietojiet 4 virzienu krānu 45° pozīcijā.
				
6 Atvienojiet un utilizējiet parauga tvertni.	7 Cieši pievienojiet jauno parauga tvertni.	8 Novietojiet 4 virzienu krānu ņemšanas pozīcijā.	9 Ievelciet asins paraugu.	10 Novietojiet 4 virzienu krānu 45° pozīcijā.
				
11 Atvienojiet parauga tvertni ar tīrām asinīm.	12 Novietojiet 4 virzienu krānu skalošanas pozīcijā.			

III. Skalošana

				
1 Skalojiet, līdz 4 virzienu krānā vairs nav asins atlieku.	2 Uzskrūvējiet jaunu neventilētu gala vāciņu/kombinēto vāciņu.	3 Novietojiet 4 virzienu krānu spiediena mērīšanas pozīcijā.	4 Skalojiet spiediena mērīšanas komplektu.	5 Kontrolē: Spiediena mērījums un rādījuma pārbaude monitorā.



Šis Quick Guide informē par svarīgākajām darbībām un neaizstāj lietošanas pamācības ievērošanu. Noteikti ņemiet vērā un ievērojiet lietošanas pamācībā sniegto informāciju par paredzēto lietošanu, kā arī brīdinājuma un drošības norādījumus. Norādījumi darbībā attiecas uz attiecīgo nodaļu un attiecīgajiem brīdinājuma norādījumiem lietošanas pamācībā. Neievērošanas gadījumā pastāv ievērojami drošības riski pacientam, lietotājam un trešajām personām. Ievērojiet savas iestādes higiēnas vadlīnijas.