


I. Przygotowanie / Napełnienie CLC

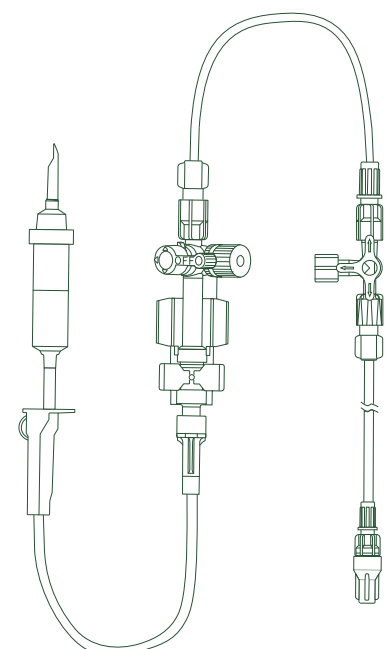


Zestaw	Classic Blood Sampling System				Zestaw
					
1 Napełnić zestaw do pomiaru ciśnienia.	2 Przekręcić kranik 4-drożny do pozycji płukania.	3 Całkowicie napełnić kranik 4-drożny.	4 Przykręcić nową niewentylowaną zatyczkę końcową/typu combi.	5 Przekręcić kranik 4-drożny do pozycji pomiaru ciśnienia.	6 Całkowicie napełnić zestaw do pomiaru ciśnienia.

II. Pobranie krwi CLC

				
1 Zdjąć i unieszkodliwić zatyczkę końcową/typu combi.	2 Mocno podłączyć pojemnik do pobierania krwi.	3 Przekręcić kranik 4-drożny do pozycji pobierania krwi.	4 Pobrać krew mieszaną.	5 Przekręcić kranik 4-drożny do pozycji 45°.
				
6 Odłączyć i unieszkodliwić pojemnik do pobierania krwi.	7 Mocno podłączyć nowy pojemnik do pobierania krwi.	8 Przekręcić kranik 4-drożny do pozycji pobierania krwi.	9 Pobrać próbkę krwi.	10 Przekręcić kranik 4-drożny do pozycji 45°.
				
11 Odłączyć pojemnik do pobierania z krwią czystą.	12 Przekręcić kranik 4-drożny do pozycji płukania.			

III. Płukanie

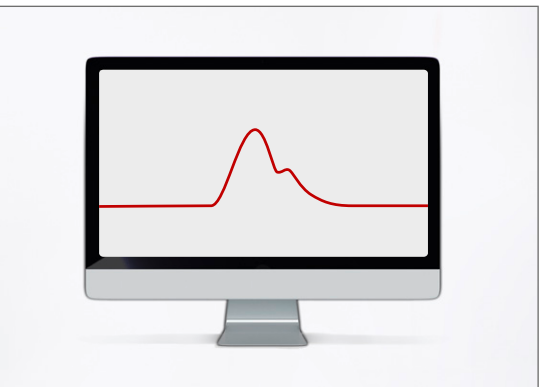				
1 Płukać do czasu, aż wszystkie pozostałości krwi zostaną usunięte z kranika 4-drożnego.	2 Przykręcić nową niewentylowaną zatyczkę końcową/typu combi.	3 Przekręcić kranik 4-drożny do pozycji pomiaru ciśnienia.	4 Przeplukać zestaw do pomiaru ciśnienia.	5 Kontrola: Skontrolować pomiar ciśnienia i wskazanie na monitorze.



Niniejszy poradnik Quick Guide informuje o najważniejszych krokach procedury i nie zastępuje przestrzegania instrukcji używania. Należy bezwzględnie przestrzegać informacji w zakresie zgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji używania. Informacje zawarte w opisie kroków procedury odnoszą się do odpowiedniego rozdziału oraz odpowiednich ostrzeżeń w instrukcji używania. Zignorowanie/nieprzestrzeganie tych informacji stwarza poważne ryzyko dla bezpieczeństwa pacjenta, użytkownika i osób trzecich. Należy przestrzegać wytycznych w zakresie higieny obowiązujących w danej placówce.