
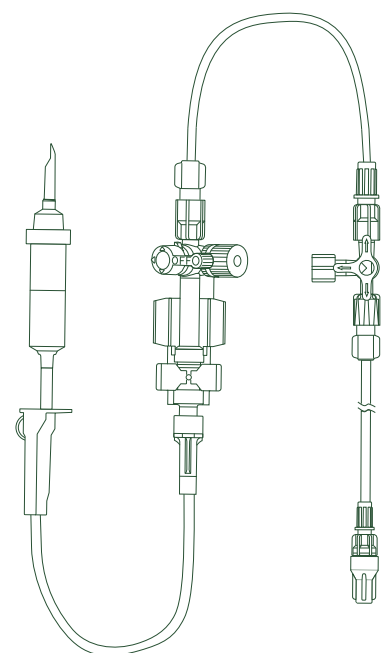


I. Pregătire / umplere CLC

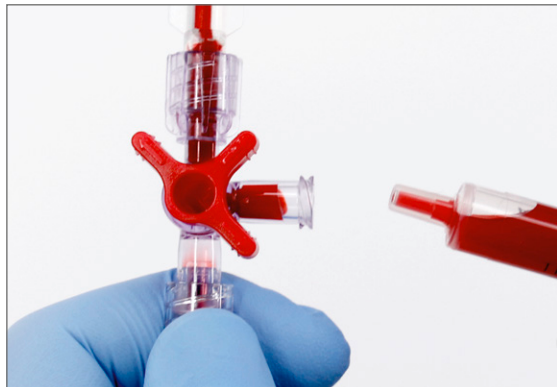


Set	Classic Blood Sampling System				Set
					
1 Umpleți setul de măsurare a presiunii.	2 Aduceți robinetul cu 4 căi în poziția de clătire.	3 Umpleți complet robinetul cu 4 căi.	4 Deșurubați noul capac final/capac combi neaerisit.	5 Aduceți robinetul cu 4 căi în poziția de măsurare a presiunii.	6 Umpleți complet setul de măsurare a presiunii.

II. Prelevare închisă a sângelui CLC

				
1 Scoateți și aruncați capacul final/capacul combi.	2 Conectați recipientul de prelevare de manieră fixă.	3 Aduceți robinetul cu 4 căi în poziția de prelevare.	4 Extragerea sângelui amestecat.	5 Aduceți robinetul cu 4 căi în poziția 45°.
				
6 Deconectați și aruncați recipientul de prelevare.	7 Conectați noul recipient de prelevare de manieră fixă.	8 Aduceți robinetul cu 4 căi în poziția de prelevare.	9 Extragerea probei de sânge.	10 Aduceți robinetul cu 4 căi în poziția 45°.
				
11 Deconectați recipientul de prelevare cu sânge curat.	12 Aduceți robinetul cu 4 căi în poziția de clătire.			

III. Clătire

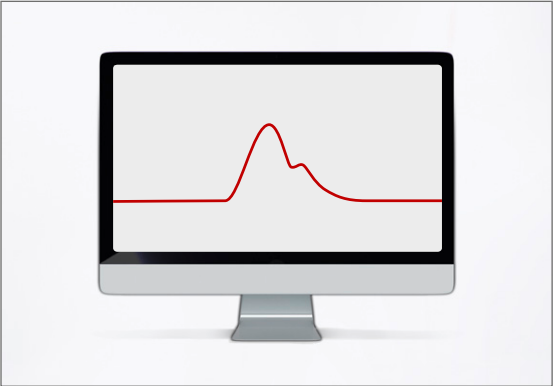				
1 Clătiți până la îndepărtarea resturilor de sânge din robinetul cu 4 căi.	2 Deșurubați noul capac final/capac combi neaerisit.	3 Aduceți robinetul cu 4 căi în poziția de măsurare a presiunii.	4 Clătiți setul de măsurare a presiunii.	5 Control: Verificați măsurarea presiunii și afișajul pe monitor.



Acest Quick Guide vă informează cu privire la pașii de acțiune cei mai importanți și nu înlocuiește respectarea instrucțiunilor de utilizare. Vă rugăm să țineți cont și să urmați neapărat informațiile cu privire la utilizarea propusă, precum și indicațiile de avertizare și de siguranță din instrucțiunile de utilizare. Indicațiile din pașii de acțiune se referă la capitolul aferent și la indicațiile de avertizare respective din instrucțiunile de utilizare. Nerespectarea/neurmarea acestora poate genera riscuri de siguranță considerabile pentru pacienți, utilizatori și terțe persoane. Respectați directivele de igienă ale instituției dvs.