
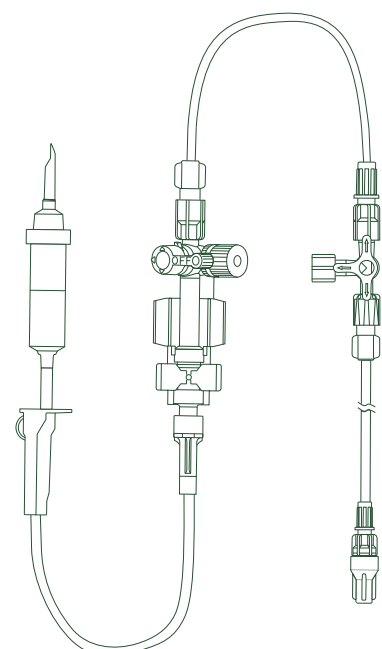


I. Priprava / polnjenje CLC

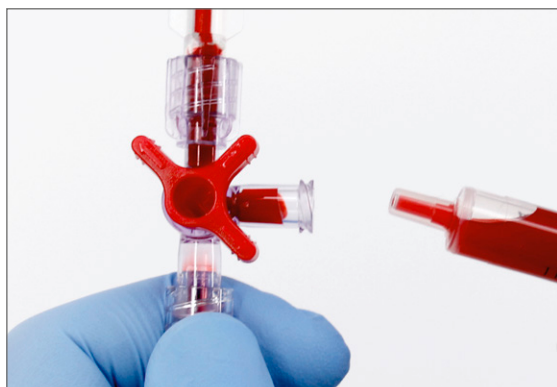


Komplet	Classic Blood Sampling System				Komplet
 1 Napolnite komplet za merjenje tlaka.	 2 4-potni ventil namestite v položaj za spiranje.	 3 4-potni ventil popolnoma napolnite.	 4 Privijte nov neprezračeni končni pokrovček/kombinirani pokrovček.	 5 4-potni ventil namestite v položaj za merjenje tlaka.	 6 Popolnoma napolnite komplet za merjenje tlaka.

II. Odvzem krvi CLC

 1 Odstranite končni pokrovček/kombinirani pokrovček in ga zavržite.	 2 Posodo za odvzem trdno priklopite.	 3 4-potni ventil namestite v položaj za odvzem.	 4 Odvzemite mešano kri.	 5 4-potni ventil namestite v položaj 45°.
 6 Odklopite in zavržite posodo za odvzem.	 7 Novo posodo za odvzem trdno priklopite.	 8 4-potni ventil namestite v položaj za odvzem.	 9 Odvzemite vzorec krvi.	 10 4-potni ventil namestite v položaj 45°.
 11 Odstranite posodo za odvzem s čisto krvjo.	 12 4-potni ventil namestite v položaj za spiranje.			

III. Spiranje

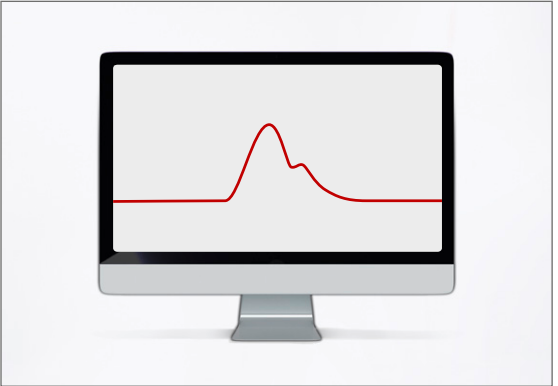 1 Spirajte, dokler ne odstranite ostankov krvi iz 4-potnega ventila.	 2 Privijte nov neprezračeni končni pokrovček/kombinirani pokrovček.	 3 4-potni ventil namestite v položaj za merjenje tlaka.	 4 Sperite komplet za merjenje tlaka.	 5 Kontrola: Preverite merjenje tlaka in prikaz na monitorju.
---	---	--	--	--



Ta Quick Guide vas obvešča o najpomembnejših korakih in ne nadomešča upoštevanja navodil za uporabo. Obvezno upoštevajte informacije o predvideni uporabi ter opozorila in varnostne napotke v navodilih za uporabo. Napotki v korakih se nanašajo na pripadajoče poglavje in ustrezna opozorila v navodilih za uporabo. V primeru neupoštevanja/heskladnosti obstajajo znatna varnostna tveganja za pacienta, uporabnika in tretje osebe. Upoštevajte higienske smernice vaše ustanove.