




CODAN

Sistemi di Infusione

Somministrazione completa e
sicura del farmaco

The decisive connection

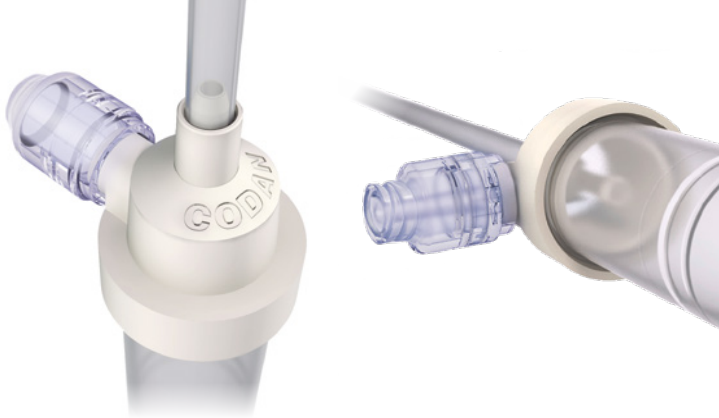


▲ SWAN-LOCK®

Grazie all'integrazione del componente SWAN-LOCK® nella camera di gocciolamento, la somministrazione dei liquidi per infusioni ed iniezioni può avvenire senza l'utilizzo di aghi. Drip SWAN® è dunque un altro prodotto CODAN che contribuisce ad aumentare notevolmente il grado di sicurezza sia per il paziente sia per il personale, riducendo al minimo i rischi.

Iniezione diretta nella camera di gocciolamento ▼

Poichè in ambito clinico si ricorre sempre più spesso a farmaci già disponibili in siringa, con il sistema Drip SWAN® l'aggiunta di farmaci può avvenire direttamente all'interno della camera di gocciolamento e garantire la miscelazione con la soluzione utilizzata. Se richiesto, CODAN mette a disposizione un protocollo di utilizzo.

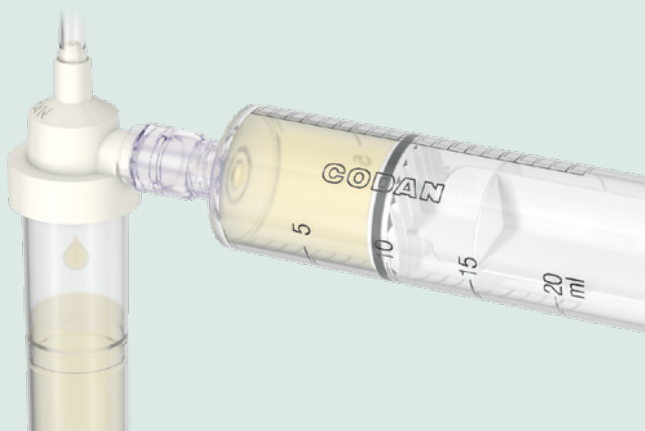


CODAN

Drip SWAN® e CODAN Guard®

Più tempo per i pazienti e il personale medico

Mentre i set tradizionali necessitano di sostituzioni frequenti, i sistemi Drip SWAN® e CODAN Guard® possono essere utilizzati per periodi più lunghi. Pertanto, Drip SWAN® e CODAN Guard® aiutano a ridurre i costi e i rifiuti, pur assicurando che tutto il farmaco venga somministrato. Specialmente per gli antibiotici, è chiaro che è molto importante che la terapia venga somministrata completamente. I sistemi Drip SWAN® e CODAN Guard® offrono ulteriori vantaggi sulla riduzione dello spazio di immagazzinamento e dei tempi del personale.

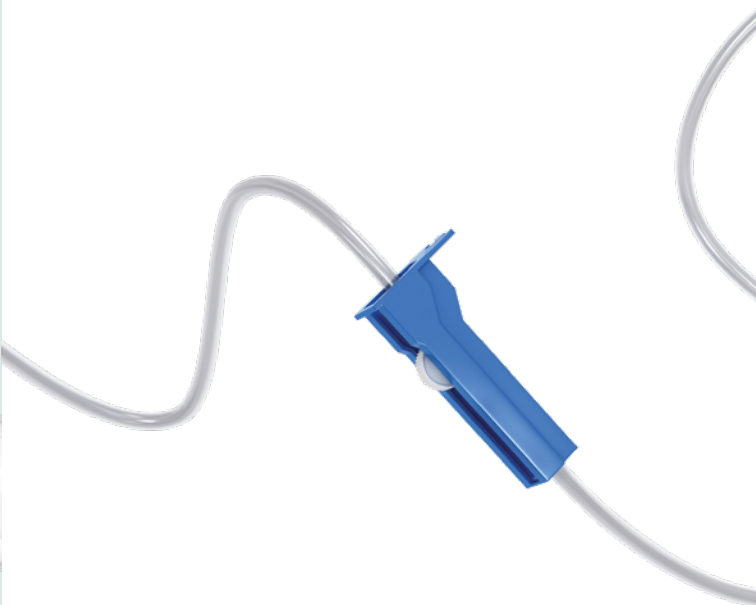

Wing-Valve ▼

La Wing-Valve all'estremità superiore della camera di gocciolamento si usa per preparare, riempire e anche aerare e ventilare il sistema durante la somministrazione del farmaco. Durante la somministrazione, l'aria si raccoglie nella camera di gocciolamento e il livello del liquido si abbassa conseguentemente. Per riportare il liquido al livello normale basta premere sulle alette della valvola.



▲ CODAN Guard®

CODAN Guard® è stato sviluppato per fornire una gestione dell'infusione sempre più facile da usare. I set infusionali CODAN Guard®, riconoscibili dalla parte superiore della camera di gocciolamento di colore grigio scuro, hanno un filtro con membrana integrata Airstop alla camera di gocciolamento per prevenire l'infusione di aria.

L'utilizzatore beneficia della possibilità di cambiare più rapidamente la sacca o il flacone, minimizzando i rischi di contaminazione e di infusione di aria. Rispetto ai set convenzionali dove è necessario eliminare l'aria entrata con molta attenzione, con i sistemi CODAN Guard® nsì può passare più semplicemente al successivo flacone di infusione - se in accordo con i protocolli ospedalieri. I sistemi CODAN Guard® consentono di eseguire un'infusione più facilmente e risparmiando tempo.



CODAN

Sistemi di Infusione

Somministrazione completa e sicura

Volete che i vostri pazienti ricevano tutta la medicazione infusa e allo stesso tempo volete più sicurezza per il personale e per i pazienti stessi?

CODAN vi offre una soluzione pulita, sicura e semplice con le nuove combinazioni di set di infusione.

CODAN Worldwide

CODAN è conosciuta a livello internazionale come fabbricante e fornitore di sistemi per la somministrazione di farmaci. Il gruppo CODAN impiega in tutto il mondo più di 1500 persone.

Il marchio CODAN è sinonimo di affidabilità, qualità e precisione, costruite sull'esperienza e il know-how acquisite in più di 60 anni di ricerca e sviluppo. Gli stabilimenti manifatturieri di proprietà e le unità commerciali dislocate nel mondo sono una garanzia di efficienza produttiva, di una rete di vendita consolidata e un servizio di prima qualità per i nostri clienti nel settore della tutela della salute.

Gamma di prodotti CODAN

- Set di infusione
- Set di trasfusione
- Linee di prolunga e connettori multipli
- Accessori per infusione e trasfusione
- Filtri per infusione e sistemi filtranti
- Prodotti per neonatologia e pediatria
- Sistemi di prelievo, preparazione e somministrazione
- CODAN CYTO®
- Prodotti Chemoprotect®
- Prodotti per urologia e ginecologia
- Siringhe monouso
- Monitoraggio invasivo della pressione sanguigna
- Soluzioni tecnologiche per l'infusione
- Pompe volumetriche e a siringa
- Software
- CODAN COMPONENTS

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN TI, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · USA
CODAN Inc. · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · United Kingdom
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
arcomed AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika
arcomed Pty Ltd · Australia
arcomed Ltd · New Zealand

La conformità dei sistemi di gestione della qualità definiti con le disposizioni della norma EN ISO 13485, della Direttiva CEE 93/42 e/o del Regolamento (UE) 2017/745 è stata certificata dagli organismi notificati pertinenti e competenti:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
23738 Lensahn, Germany

CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany

CODAN US Corporation
Santa Ana, CA 92704, USA

CODAN ARGUS AG
6340 Baar, Switzerland

arcomed AG
8302 Kloten, Switzerland

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS
4970 Rødby, Denmark



Manufacturer

CODAN Medizinische Geräte GmbH
Stig Husted-Andersen Straße 11

23738 Lensahn · DE

Tel.: +49 (0) 43 63 · 5111 · Fax: +49 (0) 43 63 · 511214

codan@codan.de

www.codancompanies.com

The decisive connection