


CODAN Xtrans®



Système intelligent pour
la mesure invasive de
la pression sanguine

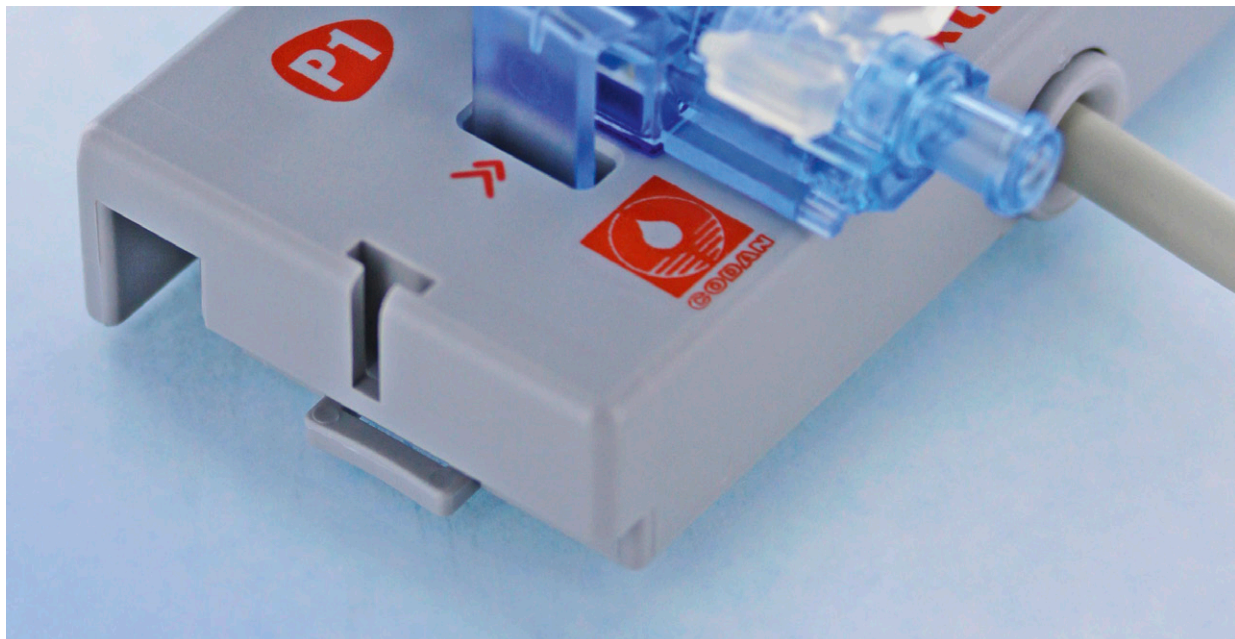

CODAN Xtrans®

Des solutions intelligentes simplifient la technique

Une manipulation d'une étonnante simplicité


Le capteur de pression Xtrans® se connecte d'un seul geste sur la plaque de contact - c'est tout. La connexion électrique avec le moniteur est en même temps établie. La combinaison d'une grande facilité d'utilisation et d'un design ergonomique - voilà ce qui caractérise le système Xtrans®.

Un contact unique et fiable

Outre la facilité et la rapidité de connexion du capteur de pression Xtrans® sur la plaque de contact, le système Xtrans® garantit également un contact fiable. Grâce à la connexion spéciale, le système est résistant à l'humidité.

Technologie + design = fiabilité

Le capteur de pression Xtrans® est équipé d'un capteur très sensible. Afin de garantir une mesure exacte de la pression, ce capteur est situé directement en dessous de la ligne de perfusion. Le système de rinçage garantit un remplissage et une purge optimaux du système. En effet, seul un système entièrement purgé peut garantir ce qui importe le plus: une mesure précise de la pression sanguine.

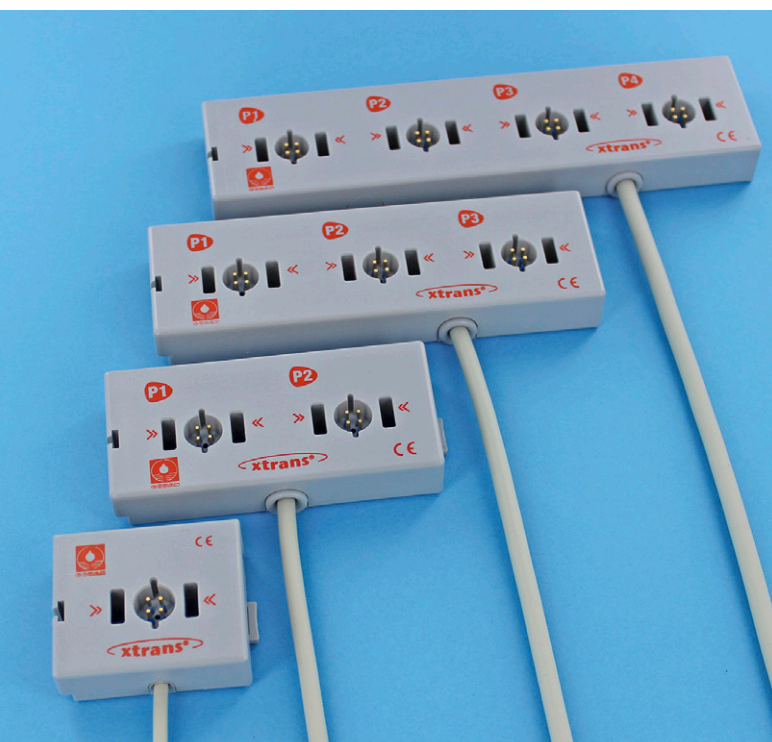

Travailler de manière économique avec Xtrans®

La construction du système Xtrans® est optimale en termes d'utilisation des matériaux. Elle écarte tout composant inutile: pas de câble pour le capteur de pression, pas de plaque de support additionnelle. Cela permet de réduire le poids du système à 12 grammes seulement!

Le système

La solution innovante pour la mesure invasive de la pression sanguine - simple, sûre, économique.

La précision sans compromis

Les composants du système Xtrans® sont destinés aussi bien à un usage multiple qu'à un usage unique.

Le composant à usage unique garantit la stérilité et un signal de pression précis dans toutes les plages de pression.

Les composants réutilisables sont fabriqués dans des matériaux très robustes et de haute qualité, ce qui garantit une très longue durée de vie du système Xtrans®.

Xtrans® - l'emploi intelligent de composants réutilisables.



Une structure de système professionnelle

Selon qu'une mesure de pression unique ou multiple est nécessaire, le système est muni de plaques de contact pour 1 à 4 capteurs de pression Xtrans®. Un assemblage de plaques individuelles est inutile - le système constitue une unité robuste et compacte.

Que les plaques soient simples ou multiples, le système est toujours relié au moniteur par un seul câble intégré. Il n'est pas nécessaire d'utiliser plusieurs câbles d'interface.


Juste avant le moniteur, le câble est muni d'une contre-fiche pour le connecteur de moniteur. Le connecteur de moniteur dispose de 1 à 4 dérivations munies de fiches pour les connexions du moniteur.

Le connecteur de moniteur peut être déconnecté du câble et rester en permanence sur le moniteur. Cela facilite la déconnexion si différents types de moniteurs sont utilisés.



Plaque de contact xxs pour applications spéciales

La plaque de contact xxs est conçue pour les applications qui requièrent un système de mesure de la pression léger et compact. Elle est idéale pour une fixation sur le bras du patient.

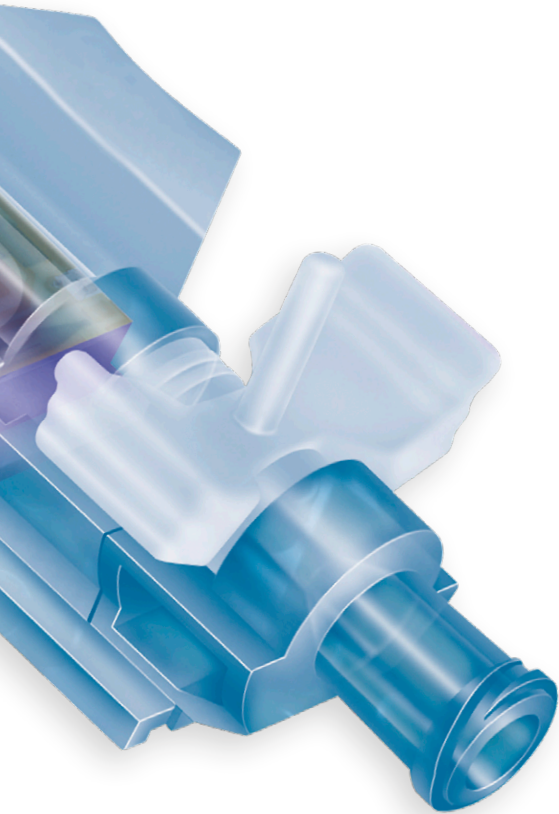

CODAN dans le monde entier



CODAN a une renommée internationale de fabricant et fournisseur de matériel de perfusion/transfusion. Le groupe CODAN emploie plus de 1500 personnes à travers le monde.

CODAN, c'est le synonyme de fiabilité, de qualité et de précision, le tout assuré par le savoir-faire et l'expérience de plus de 60 années de recherche et de développement. Nos propres usines de production et nos filiales de ventes garantissent à nos clients une production et des prestations de services de première qualité.

La gamme des produits CODAN

- Perfuseurs
- Transfuseurs
- Prolongateurs, connecteurs et rampes
- Accessoires de perfusion
- Filtres à perfusion
- Dispositifs pour la néonatalogie/pédiatrie
- Sets de transfert et de prélèvement
- CODAN CYTO®
- Gamme de protection Chemoprotect®
- Seringues
- Sets pour la mesure des pressions par voie invasive
- Pompes à perfusion
- Sets spécifiques

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN 11, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN Inc. · California · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika

La conformité des systèmes de gestion de la qualité établis avec les dispositions de la norme EN ISO 13485 et de la directive 93/42/CEE du Conseil a été certifiée par les organismes notifiés pertinents et compétents:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
23738 Lensahn, Germany

CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany

CODAN US Corporation · Santa Ana, CA 92704, USA
CODAN ARGUS AG · 6340 Baar, Switzerland

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS · 4970 Rødby, Denmark

Manufacturer

CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18 · 85661 Forstinning, Germany
Tel. +49 (0) 81 21 · 98 02 0
codan@codanpvbccc.de · www.codancompanies.com



The decisive connection