



# CODAN Système DPT-6000

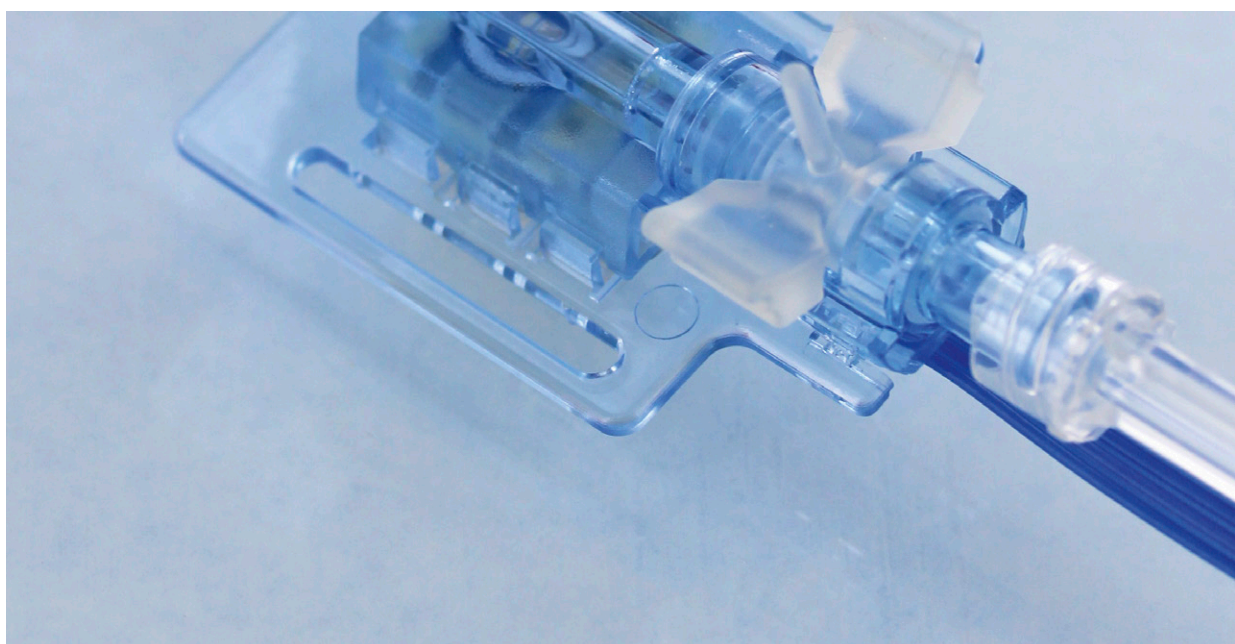

Précision et diversité des systèmes pour la mesure invasive de la pression sanguine

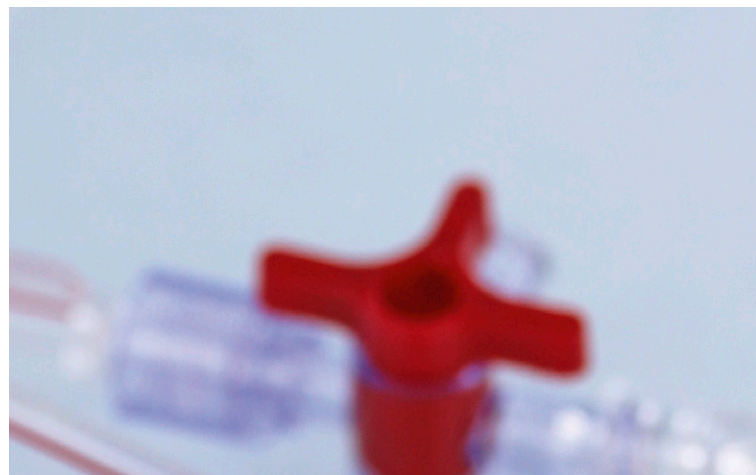

# CODAN Système DPT-6000

## Diversité des systèmes pour la mesure invasive de la pression sanguine

Les capteurs de pression de la série DPT-6000 réunissent toutes les caractéristiques des systèmes de capteurs de pression modernes et fiables conformément aux exigences émises par les hôpitaux pour la mesure invasive de la pression sanguine.

La facilité de manipulation du système ainsi que son design compact et ergonomique garantissent un emploi fiable.




### **Grâce à une technologie de puce ultramoderne,**

les pressions effectives sont transformées de manière précise en signaux électriques.

### **Le système de rinçage double fonction intégré**

avec débit linéaire permet un remplissage rapide et sans bulles d'air du set de mesure de pression connecté.

La compression des ailettes du système de rinçage permet d'augmenter le flux afin d'obtenir un débit rapide, tandis que l'actionnement de l'ergot de traction permet de contrôler la réponse du capteur de pression. La reproduction exacte sur le moniteur d'une augmentation de pression (onde carrée) indique que le système de transfert (tubulures) a été correctement purgé.

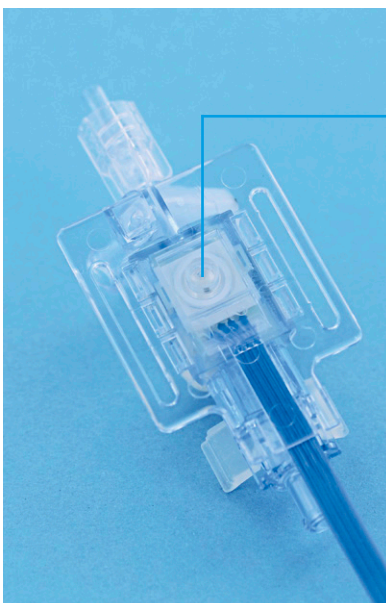

### **Le connecteur Luer au dos permet**

de raccorder le testeur du transducteur et donc de contrôler activement le fonctionnement, sans porter atteinte à la stérilité du système. Sur le moniteur, le signal de test est inversé.

### **Câble de capteur exempt de PVC**

avec fiche spéciale protégée contre les projections d'eau.



## Gamme complète d'accessoires pour le système


### Câble d'interface pour raccorder le capteur de pression au moniteur de contrôle

Ces câbles d'interface sont confectionnés sur mesure en fonction de l'équipement de l'hôpital. Ils sont munis côté moniteur de la prise pour moniteur correspondante, et côté patient d'une prise pour raccorder le capteur de pression.



### Système modulaire de plaques de support

Cette plaque de support est spécialement conçue pour les capteurs de pression de la série DPT-6000. Les guidages latéraux permettent d'assembler les plaques de support individuelles selon le principe de construction modulaire. En fonction de ses besoins, l'utilisateur peut enficher les unes à côté des autres autant de plaques de support qu'il le souhaite. La plaque de support est en plastique robuste à longue durée de vie, réutilisable et adaptée au lave-vaisselle.

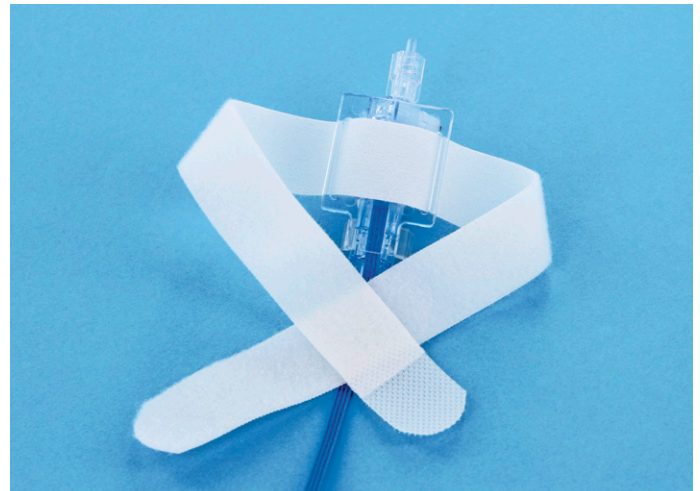


### Bande auto-agrippante pour fixer le capteur de pression sur le bras du patient

En fonction de l'indication médicale, il peut s'avérer nécessaire de positionner le capteur de pression le plus près possible de l'accès au site de ponction.

Cette bande auto-agrippante est destinée à fixer le capteur de pression directement sur le bras du patient, ce qui permet d'utiliser de très courtes lignes pour mesurer la pression.

# CODAN dans le monde entier

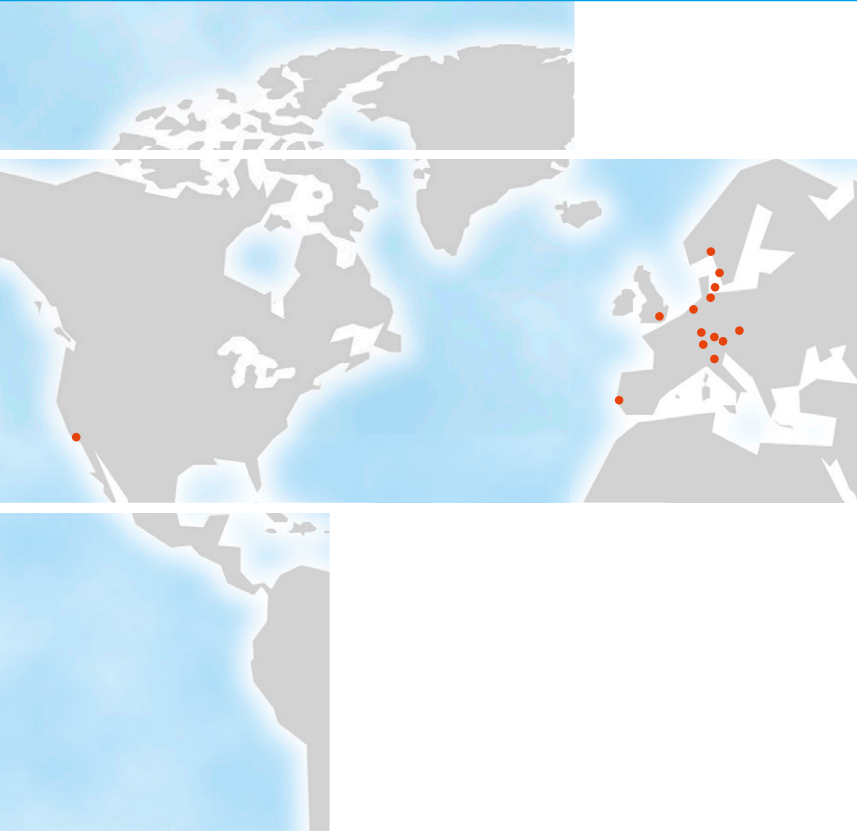

CODAN a une renommée internationale de fabricant et fournisseur de matériel de perfusion/transfusion. Le groupe CODAN emploie plus de 1500 personnes à travers le monde.

CODAN, c'est le synonyme de fiabilité, de qualité et de précision, le tout assuré par le savoir-faire et l'expérience de plus de 60 années de recherche et de développement. Nos propres usines de production et nos filiales de ventes garantissent à nos clients une production et des prestations de services de première qualité.

## La gamme des produits CODAN

- Perfuseurs
- Transfuseurs
- Prolongateurs, connecteurs et rampes
- Accessoires de perfusion
- Filtres à perfusion
- Dispositifs pour la néonatalogie/pédiatrie
- Sets de transfert et de prélèvement
- CODAN CYTO®
- Gamme de protection Chemoprotect®
- Seringues
- Sets pour la mesure des pressions par voie invasive
- Pompes à perfusion
- Sets spécifiques

## CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland  
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland  
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland  
CODAN 11, S.A. · Portugal  
CODAN US Corporation · California · USA  
CODAN Inc. · California · USA  
CODAN NORGE AS · Norge  
CODAN TRIPLUS AB · Sverige  
CODAN Limited · Great Britain  
CODAN FRANCE Sarl · France  
CODAN Medical AG · Schweiz  
CODAN ARGUS AG · Schweiz  
CODAN BV · Nederland  
CODAN s.r.l. · Italia  
CODAN Medical GmbH · Österreich  
CODAN Medical ApS · Danmark  
CODAN DEHA ApS · Danmark  
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika

La conformité des systèmes de gestion de la qualité établis avec les dispositions de la norme EN ISO 13485 et de la directive 93/42/CEE du Conseil a été certifiée par les organismes notifiés pertinents et compétents:

### TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH  
23738 Lensahn, Germany

CODAN pvb Critical Care GmbH  
85661 Forstinning, Germany

CODAN US Corporation · Santa Ana, CA 92704, USA  
CODAN ARGUS AG · 6340 Baar, Switzerland

### Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS · 4970 Rødby, Denmark

### Manufacturer

CODAN pvb Critical Care GmbH  
Römerstraße 18 · 85661 Forstinning, Germany  
Tel. +49 (0) 81 21 · 98 02 0  
codan@codanpvbccc.de · www.codancompanies.com



**The decisive connection**