



CODAN

Check Valves

Programma completo di valvole antiriflusso

The decisive connection



CODAN

Check Valves



Piccole, perfette e sicure

Tecnica di punta in formato mini

Nelle valvole antiriflusso CODAN, come in tutti i prodotti CODAN, si riassumono decenni d'esperienza, di ricerca e sviluppo.


La precisione della lavorazione produce valvole antiriflusso di estrema affidabilità e facilità di manovra. In posizione di riposo, il corpo della valvola è chiuso e si apre automaticamente con una piccola pressione di mandata. Si richiude poi, sempre automaticamente, non appena si crea una contropressione o viene meno la pressione di mandata. Anche le infusioni ad alta viscosità passano la valvola in modo sicuro e affidabile.

Le valvole antiriflusso si distinguono per il volume di riempimento particolarmente ridotto di soli 0,15 ml e possono essere integrate senza problemi in tutti i sistemi d'infusione.

Le valvole antiriflusso CODAN trovano impiego in tutti i settori del lavoro clinico di ogni giorno, sia nella terapia standard con infusioni in reparto, che nella sala operatoria, nella stazione intensiva o nell'anestesia.

Sicurezza integrata

Le valvole antiriflusso CODAN sono un piccolo dettaglio di grandissima importanza per la sicurezza del paziente. Montate come elementi fissi od opzionali in diversi prodotti CODAN, le valvole antiriflusso impediscono in modo affidabile, senza bisogno di altri interventi, sia il ritorno dei liquidi d'infusione (in entrambi i sensi), che il riflusso del sangue del paziente nel sistema d'infusione.

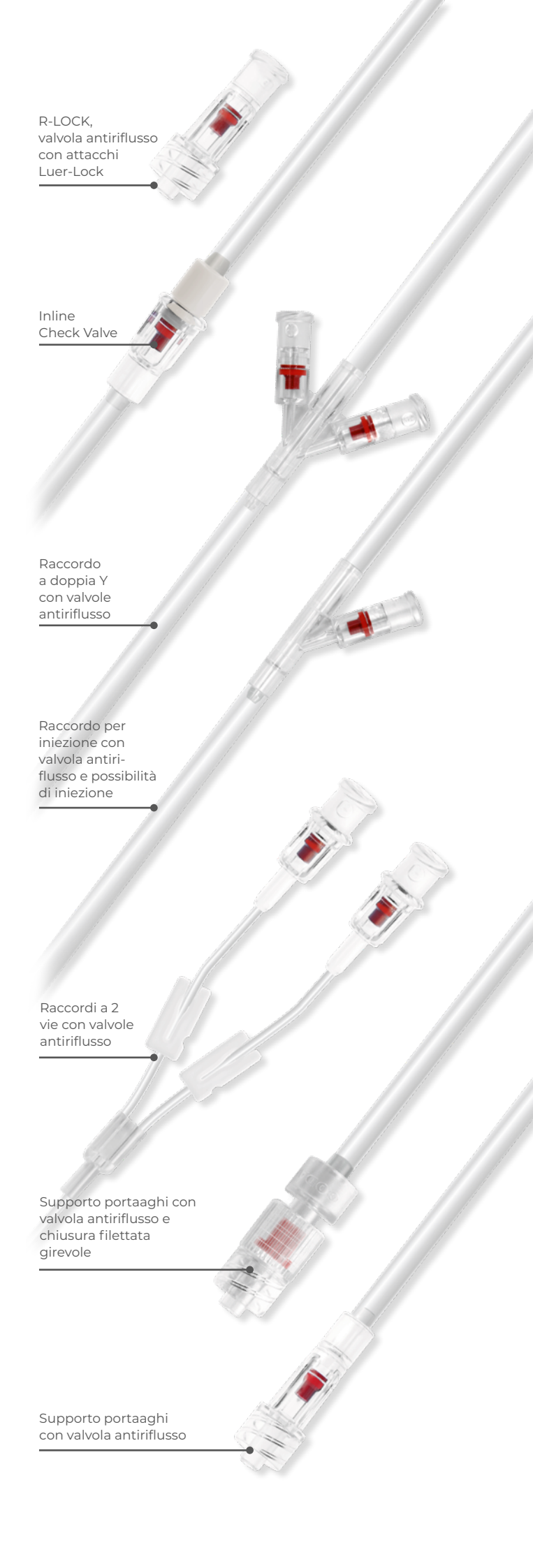

R-LOCK,
valvola antiriflusso
con attacchi
Luer-Lock

Inline
Check Valve

Raccordo
a doppia Y
con valvole
antiriflusso

Raccordo per
iniezione con
valvola anti-
riflusso e possibilità
di iniezione

Raccordi a 2
vie con valvole
antiriflusso

Supporto portaaghi con
valvola antiriflusso e
chiusura filettata
girevole

Supporto portaaghi
con valvola antiriflusso

Versatilità e precisione

Applicabile in molte varianti

Per ogni applicazione è disponibile la giusta soluzione. La valvola antiriflusso può essere integrata come componente singola in un sistema esistente. È inoltre disponibile un gran numero di set di collegamento, prolunghe, connettori, sistemi completamente confezionati e sistemi speciali con valvole antiriflusso. Tutte le varianti dispongono di tubi di diverso diametro. I connettori con valvola antiriflusso sono disponibili con raccordi a 2, 3 o 4 vie.

Connessioni

Le valvole antiriflusso nei collegamenti dei set per infusione CODAN rendono la loro manipolazione particolarmente semplice e sicura: meno sono le componenti utilizzate, più sono rapide e affidabili la preparazione e la somministrazione dell'infusione. Diventa particolarmente importante il raccordo a Y per iniezione per la somministrazione sicura e senza rischi di citostatici.

Varianti di attacco

Particolarmente comodi e semplici da usare sono gli attacchi dotati di chiusura filettata girevole, che consentono una chiusura sicura del Luer-Lock senza torsione del tubo. Ovviamente CODAN offre anche tutti i set per infusione standard con valvole antiriflusso integrate.

CODAN Worldwide

CODAN è conosciuta a livello internazionale come fabbricante e fornitore di sistemi per la somministrazione di farmaci. Il gruppo CODAN impiega in tutto il mondo più di 1500 persone.

Il marchio CODAN è sinonimo di affidabilità, qualità e precisione, costruite sull'esperienza e il know-how acquisite in più di 60 anni di ricerca e sviluppo. Gli stabilimenti manifatturieri di proprietà e le unità commerciali dislocate nel mondo sono una garanzia di efficienza produttiva, di una rete di vendita consolidata e un servizio di prima qualità per i nostri clienti nel settore della tutela della salute.

Gamma di prodotti CODAN

- Set di infusione
- Set di trasfusione
- Linee di prolunga e connettori multipli
- Accessori per infusione e trasfusione
- Filtri per infusione e sistemi filtranti
- Prodotti per neonatologia e pediatria
- Sistemi di prelievo, preparazione e somministrazione
- CODAN CYTO®
- Prodotti Chemoprotect®
- Prodotti per urologia e ginecologia
- Siringhe monouso
- Monitoraggio invasivo della pressione sanguigna
- Soluzioni tecnologiche per l'infusione
- Pompe volumetriche e a siringa
- Software
- CODAN COMPONENTS

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN II, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · USA
CODAN Inc. · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · United Kingdom
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
arcomed AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika
arcomed Pty Ltd · Australia
arcomed Ltd · New Zealand

La conformità dei sistemi di gestione della qualità definiti con le disposizioni della norma EN ISO 13485, della Direttiva CEE 93/42 e/o del Regolamento (UE) 2017/745 è stata certificata dagli organismi notificati pertinenti e competenti:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
23738 Lensahn, Germany

CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany

CODAN US Corporation
Santa Ana, CA 92704, USA

CODAN ARGUS AG
6340 Baar, Switzerland

arcomed AG
8302 Kloten, Switzerland

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS
4970 Rødby, Denmark



Manufacturer

CODAN Medizinische Geräte GmbH
Stig Husted-Andersen Straße 11
23738 Lensahn · DE
Tel.: +49 (0) 43 63 · 5111 · Fax: +49 (0) 43 63 · 5112 14
codan@codan.de
www.codancompanies.com

The decisive connection