



CODAN

CLOSE-LOCK

Verlässlicher Schutz

The decisive connection



CODAN

CLOSE-LOCK

Verlässlicher Schutz



Sicherheit bei der Zubereitung und Verabreichung

Mit dem CODAN CLOSE-LOCK bietet CODAN nun auch einen nadelfreien Adapter an, der medizinischem Fachpersonal mehr Sicherheit und Effizienz bei der Zubereitung und Verabreichung von Medikamenten ermöglicht – insbesondere beim Umgang mit gefährlichen Wirkstoffen.

Der Adapter schafft ein sicheres System durch automatisches Verschließen beim Entkonnizieren, welches das Risiko chemischer oder mikrobieller Kontamination verringert und gleichzeitig eine einfache, intuitive Handhabung erlaubt.

Einfach integrierbar

CODAN CLOSE-LOCK ist kompatibel mit allen gängigen Luer- und Luer-Lock-Anschlüssen sowie mit anderen Adaptern z. B. CODAN SWAN-LOCK®.

Das macht ihn zu einer universell einsetzbaren Lösung, die sich flexibel in bestehende Arbeitsabläufe einfügt – ohne zusätzliches Zubehör.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Schützt Anwender durch reduzierte Exposition gegenüber Medikamenten
- Nadelfreie Anwendung, die das Verletzungsrisiko und Kreuzkontaminationen drastisch reduziert
- Vermeidet Leckagen & Verbindungsfehler durch selbstschließendes Ventil
- Reduziert Infektionsrisiko durch die glatte, desinfizierbare Oberfläche
- Geringes Totraumvolumen - dadurch universal einsetzbar
- Optimal für sicheren Transport und hygienische Lagerung geeignet



Einsatzbereiche in der Infusionstherapie


CODAN CLOSE-LOCK – Ihr verlässlicher Adapter von der Zubereitung bis zur sicheren Verabreichung:

- **Zubereitung:** Sicheres Aspirieren und Konnektieren mit Spike-Systemen wie z.B. dem CODAN Spike SWAN-LOCK® – schnell, geschlossen und kontaminationsfrei
- **Verabreichung:** Sichere Applikation von Medikamenten und Bolusgabe über Infusionssystemen, Dreiwegehähne oder Katheter
- **Entsorgung:** Die dauerhaft geschlossene Verbindung sorgt für maximale Sicherheit – bis zur letzten Anwendung

Geeignet für Zytostatika sowie alkohol- oder lipidhaltige Medikamente – metall- und latexfrei; auch für den Einsatz in MRT-Umgebungen.

Sicherheit bis zum Schluss

Die Schutzkappe sorgt dafür, dass die Male Luer Verbindung während Transport und Lagerung nicht unbeabsichtigt aktiviert wird und schützt damit zuverlässig vor Kontamination und dem Verlust der Innensterilität.

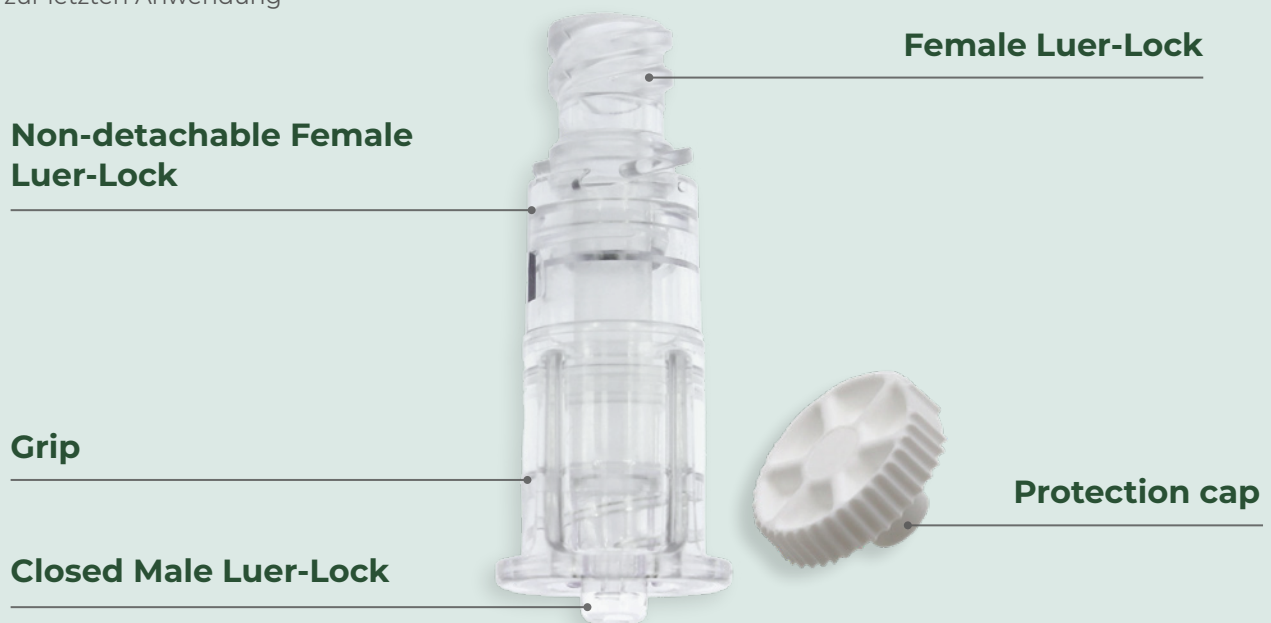

Technische Spezifikationen

Farbe: Transparent

Materialien: PSU, PC, Silikon, TPE

Ventiltyp: Selbstschließend (ohne Aktivierung geschlossen)

Flussrate: ca. 134 ml/min (1 m H₂O-Säule)

Priming-Volumen: 0,1 ml

Druckbeständigkeit: 2,0 bar / -0,2 bar gemäß EN ISO 8536-8/-10

Mikrobieller Schutz: Bis zu 50 Aktivierungen innerhalb von 96 h

Displacement: Neutral

Weitere Informationen & IFU

Detaillierte Hinweise zur Anwendung finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder unter:

www.codancompanies.com

CODAN weltweit

CODAN ist international bekannt als Hersteller und Lieferant von medizinischen Übertragungssystemen. Bei den CODAN Companies sind weltweit über 1500 Mitarbeitende beschäftigt.

Der Name CODAN steht für Zuverlässigkeit, Qualität und Präzision - dafür sorgen das Know-How und die Erfahrung aus über 60 Jahren Forschung und Entwicklung. Eigene Produktionsstätten und Vertriebsfirmen weltweit garantieren eine effiziente Produktion, ein dichtes Vertriebsnetz und einen erstklassigen Service für unsere Kunden im Gesundheitswesen.

CODAN Produktpalette

- Infusionssets
- Transfusionssets
- Verlängerungen & Mehrfachverbinder
- Zubehör für Infusion und Transfusion
- Infusionsfilter & Filtersysteme
- Produkte für die Neonatologie und Pädiatrie
- Entnahme-, Zubereitungs- und Verabreichungssysteme
- CODAN CYTO®
- Chemoprotect® Produkte
- Produkte für Urologie und Gynäkologie
- Einmalspritzen
- Invasive Blutdruckmessung
- Infusionstechnologie-Lösungen
- Volumetrische Infusionspumpen & Spritzenpumpen
- Software
- CODAN COMPONENTS

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN II, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · USA
CODAN Inc. · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · United Kingdom
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
arcomed AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika
arcomed Pty Ltd · Australia
arcomed Ltd · New Zealand

Die Übereinstimmung der vorhandenen Qualitätsmanagementsysteme mit den Vorschriften der Norm EN ISO 13485, der europäischen Richtlinie 93/42/EWG und/oder der Verordnung (EU) 2017/745 wurde von den jeweils zuständigen benannten Stellen zertifiziert:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
23738 Lensahn, Germany

CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany

CODAN US Corporation
Santa Ana, CA 92704, USA

CODAN ARGUS AG
6340 Baar, Switzerland

arcomed AG
8302 Kloten, Switzerland

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS
4970 Rødby, Denmark



Kontakt

CODAN pvb Medical GmbH
Stig Husted-Andersen Straße 11
23738 Lensahn · DE
Tel.: +49 (0) 43 63 · 51 15 11 · Fax: +49 (0) 43 63 · 51 15 00
codan@codanpvbmedical.de
www.codancompanies.com

Hersteller

CODAN Medizinische Geräte GmbH
Stig Husted-Andersen Straße 11
23738 Lensahn, Germany
Tel. +49 (0) 43 63 · 51 11 · Fax +49 (0) 43 63 · 51 12 14
codan@codan.de
www.codancompanies.com

The decisive connection