



CODAN

Connect Z®

Nadelfreie Zubereitung und
Verabreichung von Medikamenten

The decisive connection



CODAN

Connect Z®

Connect Z® - Nadelfreie Zubereitung und Verabreichung von Medikamenten

Die Zubereitung von Zytostatika erfordert strukturierte Arbeitsabläufe, um Risiken wie Leckagen, Exposition gegenüber Gefahrstoffen und möglichen Kontaminationen zu minimieren. Connect Z® ermöglicht eine nadelfreie Zubereitung sowie Übertragung von Zytostatika und anderen hochpotenten Medikamenten. In Kombination mit Cyto-Ad-Wing Z® / Cyto-Ad Z® unterstützt das System klar strukturierte Arbeitsabläufe bei der Zubereitung und Verabreichung.

Produktübersicht

Connect Z® Sekundärleitungen sind vorgesehen für:


- Mischen, Entnehmen und Übertragen von Flüssigkeiten während der Zubereitung
- Anschluss an die Primärinfusionsleitung zur intravenösen Verabreichung und Unterstützung sicherer, kontrollierter Arbeitsabläufe, z. B. in Kombination mit Cyto-Ad-Wing Z® / Cyto-Ad Z®

Für unterschiedliche Therapieanforderungen stehen verschiedene Konfigurationsoptionen zur Verfügung:

- 0,2 µm I.V.STAR® Infusionsfilter
- PVC-Leitungen (TOTM) oder PVC-freie Varianten (green line® PP)

Lichtschutzsysteme:


- LIGHT-PROTECTED (weiß, 290-900 nm)
- LIGHT-SAFE™ (gelb, 290-450 nm)

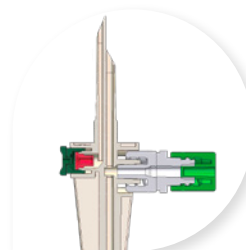

Integriertes **CODAN Check Valve** zum Schutz des Filters gegen Feuchtigkeit und Filterblockage

Spezielles Spike-Design für einfaches Einstechen und sichere Verbindung

Hydrophober Filter für eine sterile Belüftung während der Verabreichung, wenn erforderlich, z.B. für monoklonale Antikörper

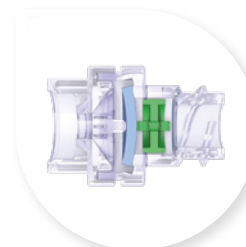

Nadelfreier Mischadapter für eine sichere Entnahme und Zugabe

- Luer-aktiver Auf-Zu-Mechanismus
- Automatischer Verschluss nach Gebrauch



ONCE-LOCK 2 Adapter für nicht entkonnectierbare, dauerhaft sichere Verbindung zum Cyto-Ad-Wing Z® / Cyto-Ad Z®



FlowStop Schutzkappe mit hydrophobem Filter

- luftdurchlässig beim Primen
- stoppt die Flüssigkeit bei Kontakt mit der Filtermembran

Add-ons

Add-ons sind verfügbar, um die Sicherheit, Stabilität und Anwenderfreundlichkeit des Connect Z® Systems während der Zubereitung, Verabreichung und Entsorgung von Zytostatika weiter zu unterstützen.

Connect Z® Clip universal

- Sorgt für eine feste und sichere Verbindung zwischen Sekundärleitung und mit Medikament befülltem Infusionsbeutel
- Ideal für Transport und Handling (z.B. Pneumatiksysteme)




CLOSE-LOCK Adapter

- Selbstschließendes Ventil verhindert zuverlässig Leckagen und Kontamination
- Nicht entkonnektierbare Verbindung für zusätzliche Sicherheit während der Zubereitung, Verabreichung und Entsorgung
- Kompatibel mit allen gängigen Male Luer- und Luer-Lock-Verbindungen sowie mit nadelfreien Systemen
- Geeignet für Zytostatika sowie alkohol- und lipidhaltige Medikamente; metall- und latexfrei für den sicheren Einsatz in MRT-Umgebungen



Connect Z® Spike Adapter

- Ermöglicht die Integration in bestehende Systeme anderer Hersteller und unterstützt gleichzeitig vertraute Connect Z® Arbeitsabläufe
- Belüfteter Spike und zusätzlicher Mischadapter für eine flexible Anwendung
- Geeignet zur Erstellung einer Sekundärleitung in Kombination mit einem Koppelsystem mit 2x Male Luer-Lock Adapter

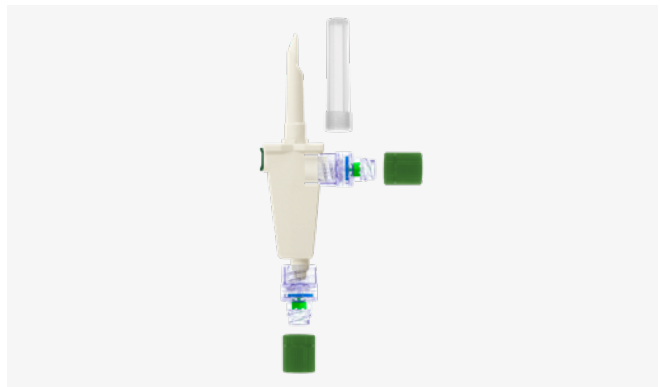

Chemoprotect®

Ergänzende Schutz- und Sicherheitsprodukte für den Umgang mit Zytostatika – von persönlicher Schutzausrüstung über Zubereitungs- und Transportlösungen bis hin zu Produkten für den Kontaminationsfall.

Weitere Informationen finden Sie in der Chemoprotect® Broschüre.



CODAN Spikes

Sichere und benutzerfreundliche Lösungen für die Vorbereitung und Entnahme von Arzneimitteln – mit sterilem Luftfilter, nadelfreiem Handling und zuverlässigem Schutz vor Aerosolen und Kontamination. Für verschiedene pharmazeutische Anwendungen und maximale Sicherheit im Alltag.

Weitere Informationen finden Sie in der CODAN Spikes Broschüre



CODAN weltweit

CODAN ist international bekannt als Hersteller und Lieferant von medizinischen Übertragungssystemen. Bei den CODAN Companies sind weltweit über 1500 Mitarbeitende beschäftigt.

Der Name CODAN steht für Zuverlässigkeit, Qualität und Präzision - dafür sorgen das Know-How und die Erfahrung aus über 60 Jahren Forschung und Entwicklung. Eigene Produktionsstätten und Vertriebsfirmen weltweit garantieren eine effiziente Produktion, ein dichtes Vertriebsnetz und einen erstklassigen Service für unsere Kunden im Gesundheitswesen.

CODAN Produktpalette

- Infusionssets
- Transfusionssets
- Verlängerungen & Mehrfachverbinder
- Zubehör für Infusion und Transfusion
- Infusionsfilter & Filtersysteme
- Produkte für die Neonatologie und Pädiatrie
- Entnahme-, Zubereitungs- und Verabreichungssysteme
- CODAN CYTO®
- Chemoprotect® Produkte
- Produkte für Urologie und Gynäkologie
- Einmalspritzen
- Invasive Blutdruckmessung
- Infusionstechnologie-Lösungen
- Volumetrische Infusionspumpen & Spritzenpumpen
- Software
- CODAN COMPONENTS

CODAN Companies

CODAN Medizinische Geräte GmbH · Deutschland
CODAN pvb Critical Care GmbH · Deutschland
CODAN pvb Medical GmbH · Deutschland
CODAN TI, S.A. · Portugal
CODAN US Corporation · USA
CODAN Inc. · USA
CODAN NORGE AS · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · United Kingdom
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
CODAN ARGUS AG · Schweiz
arcomed AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
CODAN s.r.l. · Italia
CODAN Medical GmbH · Österreich
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark
CODAN MEDITECH s.r.o. · Česká republika
arcomed Pty Ltd · Australia
arcomed Ltd · New Zealand

Die Übereinstimmung der vorhandenen Qualitätsmanagementsysteme mit den Vorschriften der Norm EN ISO 13485, der europäischen Richtlinie 93/42/EWG und/oder der Verordnung (EU) 2017/745 wurde von den jeweils zuständigen benannten Stellen zertifiziert:

TÜV SÜD Product Service GmbH

CODAN Medizinische Geräte GmbH
23738 Lensahn, Germany

CODAN pvb Critical Care GmbH
85661 Forstinning, Germany

CODAN US Corporation
Santa Ana, CA 92704, USA

CODAN ARGUS AG
6340 Baar, Switzerland

arcomed AG
8302 Kloten, Switzerland

Presafe Denmark A/S

CODAN Medical ApS
4970 Rødby, Denmark



Kontakt

Global Sales & Marketing Management
CODAN Companies
Tel.: +49 (0) 43 63 · 5111
customerservice@codancompanies.com
www.codancompanies.com

Hersteller

CODAN Medizinische Geräte GmbH
Stig Husted-Andersen Straße 11
23738 Lensahn · DE
Tel.: +49 (0) 43 63 · 5111 · Fax: +49 (0) 43 63 · 5112 14
codan@codan.de
www.codancompanies.com

The decisive connection